

## Step-by-step instructions

### 1.0 Importing CAD libraries for prosthetic components into the exocad® CAD software

**Note:** CAD libraries for implant analogs see page 4

Previous versions of existing CAD libraries for prosthetic components (incl. from third party providers) should be deleted before importing the new library in order to minimize data errors.

#### Removing previous versions of the library

1. Choose the local hard disk (C:) within the Windows Explorer



2. Choose folder Program Files (x86) \*

Benutzer	20.03.2013 16:02	Dateiordner
IDE	16.08.2012 13:41	Dateiordner
PerfLogs	14.07.2009 05:20	Dateiordner
Program Files	14.04.2013 23:38	Dateiordner
<b>Program Files (x86)</b>	<b>14.04.2013 23:38</b>	<b>Dateiordner</b>
SWSetup	18.03.2013 15:41	Dateiordner
Temp	08.05.2013 11:52	Dateiordner
Windows	17.06.2013 08:53	Dateiordner

\* Exocad's installation folder is installed according to the following steps although the installation folder location may vary

3. Choose folder *exocad® DentalCAD* for the currently used version of the CAD

Adobe	18.03.2013 10:05	Dateiordner
Apple Software Update	18.03.2013 14:10	Dateiordner
Bonjour	18.03.2013 14:10	Dateiordner
Common Files	18.03.2013 14:33	Dateiordner
Ericsson	05.03.2013 11:18	Dateiordner
<b>exocad DentalCAD Build 4814</b>	<b>19.03.2013 13:30</b>	<b>Dateiordner</b>
exocad-DentalCAD Build 4570	18.03.2013 10:22	Dateiordner
FreePDF_XP	16.08.2012 13:50	Dateiordner
GFI	16.08.2012 13:50	Dateiordner

4. Choose folder *DentalCADApp*

Name	Änderungsdatum	Typ
CAD-Data	21.06.2013 10:23	Dateiordner
<b>DentalCADApp</b>	18.03.2013 10:22	Dateiordner
DentalDB	18.03.2013 10:22	Dateiordner

5. Choose folder *library*

Name	Änderungsdatum	Typ
bin	18.03.2013 10:21	Dateiordner
config	18.03.2013 10:21	Dateiordner
exocam	18.03.2013 10:21	Dateiordner
icons	18.03.2013 10:21	Dateiordner
languages	18.03.2013 10:22	Dateiordner
<b>library</b>	18.03.2013 10:22	Dateiordner
plugins	18.03.2013 10:22	Dateiordner
Skins	18.03.2013 10:22	Dateiordner

6. Choose folder *implant*

Name	Änderungsdatum	Typ
articulator	18.03.2013 10:22	Dateiordner
attachments	18.03.2013 10:22	Dateiordner
bar	18.03.2013 10:22	Dateiordner
bolts	18.03.2013 10:22	Dateiordner
gfx	18.03.2013 10:22	Dateiordner
<b>implant</b>	20.06.2013 22:50	Dateiordner
metadata	18.03.2013 10:22	Dateiordner
pontics	18.03.2013 10:22	Dateiordner
rendereffects	18.03.2013 10:22	Dateiordner
retentions	18.03.2013 10:22	Dateiordner
teeth	18.03.2013 10:22	Dateiordner
visualizers	18.03.2013 10:22	Dateiordner

7. Choose and delete folder with the currently used CAD library (in example *CAMLOG\_Titanium\_base\_CADCAM\_for\_exocad*)

cadstar-s-bl	04.06.2013 17:33	Dateiordner
cadstar-s-syn	04.06.2013 17:33	Dateiordner
<b>CAMLOG_Titanium_base_CADCAM_for_exocad</b>	03.01.2014 15:44	Dateiordner
d5h14o15	04.06.2013 17:33	Dateiordner
DDG-1100	04.06.2013 17:33	Dateiordner
DDG-1100 System	04.06.2013 17:33	Dateiordner

After removing previous versions of the library or libraries, the import of the current version (of the library) can be started.

1. Copy folder as part of the downloaded zipfile from the CAMLOG/iSy website




in folder *implant*.

(positioned in the same path as described for removing the former version of the library – see previous steps # 1 to 6)

Name	Änderungsdatum	Typ
articulator	18.03.2013 10:22	Dateiordner
attachments	18.03.2013 10:22	Dateiordner
bar	18.03.2013 10:22	Dateiordner
bolts	18.03.2013 10:22	Dateiordner
gfx	18.03.2013 10:22	Dateiordner
<b>implant</b>	<b>20.06.2013 22:50</b>	<b>Dateiordner</b>
metadata	18.03.2013 10:22	Dateiordner
pontics	18.03.2013 10:22	Dateiordner
rendereffects	18.03.2013 10:22	Dateiordner
retentions	18.03.2013 10:22	Dateiordner
teeth	18.03.2013 10:22	Dateiordner
visualizers	18.03.2013 10:22	Dateiordner

**Important:**  
Do not import a Zip archive – only unzipped folders can be used!

2. Double-check that the proper library has been imported in the *implant* folder

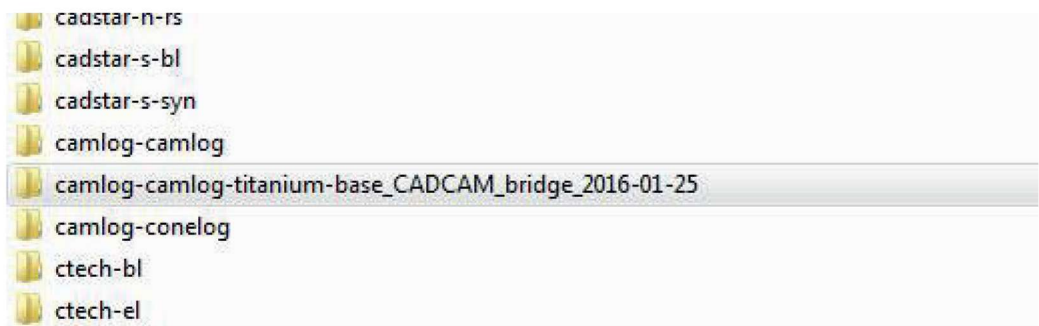

3. Close folder.


The exocad® CAD software can now be used with the current CAMLOG library

If you have another folder hierarchy please contact your exocad® reseller.

## Step-by-step instructions

### 2.0 Importing CAD Implant analog libraries into the exocad® CAD software


Disclaimer: Modelcreator is available in exocad® software version EB5164 and above. In combination with Implant analogs the following message appears (status March 2017):

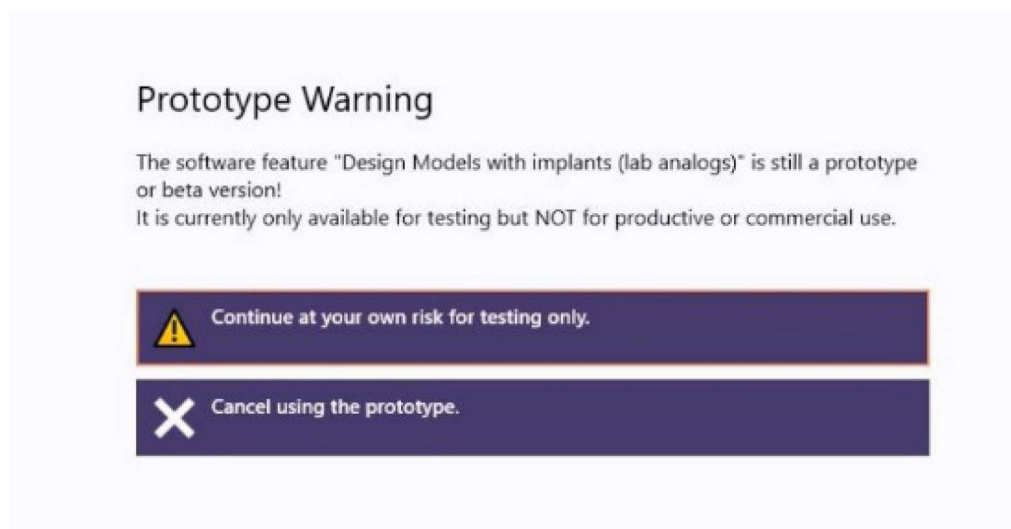

To import Implant analog libraries, follow the steps as described in chapter 1.0, but be aware they are saved in a different folder.

Implant analog libraries must be saved at

**Exocad > DentalCAD > DentalCadApp > library > modelcreator > implants**

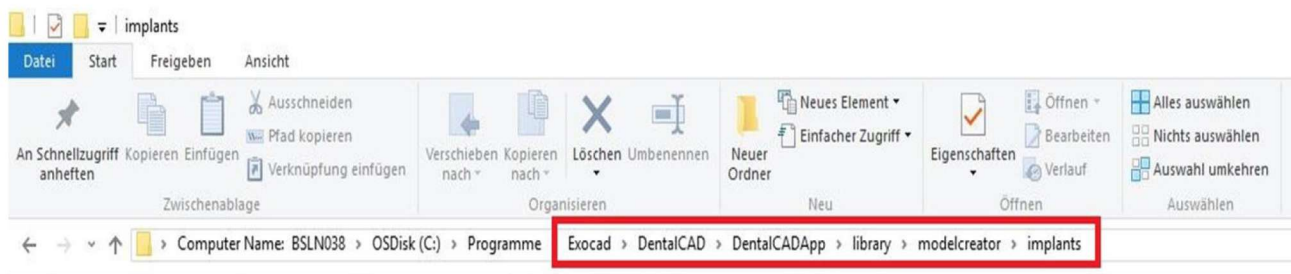

If you have another folder hierarchy please contact your exocad® reseller.