



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

[HTTPS://WWW.PALTOP.RU](https://www.paltop.ru)

Уважаемые коллеги и партнёры!



Компания Paltop Dental Implants, в лице Генерально-го директора Певзнера Михаила Павловича, является официальным, единственным дистрибьютором в России концерна A Keystone Dental Company, производящим самую современную, цифровую и удобную в использовании имплантационную систему Paltop Dental. Производство всех компонентов имеет полный замкнутый цикл на едином собственном заводе, позволяя тем самым получить продукцию высочайшего класса.

Лозунг нашей компании — безупречный сервис, быстрая логистика и индивидуальный подход к каждому партнеру.

Мы приглашаем вас к сотрудничеству, присоединиться к команде профессиональных врачей стоматологов.

В лице нашей компании вы получите стабильного, надежного партнера и все преимущества работы с имплантационной системой Paltop.

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ



С уважением,



Доктор Певзнер Михаил Павлович

Генеральный директор Paltop Dental Implants
Врач-стоматолог (DMD). Главный врач Клиники IDS.
Основатель Школы стоматологии доктора Певзнера с 2002 года.
Генеральный директор компании Dental Office12.



СОДЕРЖАНИЕ

ПОЧЕМУ PALTOP?	2
СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ	4
ПРОТЕТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ	8
СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ С КОНИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЕМ	22
ПРОТЕТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ С КОНИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЕМ	26
ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ	35
ЦИФРОВЫЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ	42
ПРОТОКОЛЫ ОСТЕОТОМИИ	46

ПОЧЕМУ PALTOP?

- ✓ Paltop предоставляет полный пакет услуг по обучению, изготовлению и продвижению навигационной хирургии в Вашей клинике;
- ✓ Paltop - продуманная система имплантации, включающая в себя все самые современные мировые технологии;
- ✓ Разработана для сложных клинических случаев, особенно в ортопедии;
- ✓ Дизайн и поверхность имплантатов для любого клинического случая, включая пациентов с системными заболеваниями;
- ✓ Хирургические наборы изготовлены на всемирно-известном заводе Komet (Германия);
- ✓ Типы соединений: современный конус 11° и классический шестигранник;
- ✓ Уникальный ступенчатый дизайн сверл позволяет устанавливать имплантаты в абсолютно точной позиции;
- ✓ Отсутствие резорбции за счет рационального дизайна имплантата и ортопедических компонентов;
- ✓ Система нераскручивающихся винтов;
- ✓ Оригинальные титановые основания для различной высоты десны и окклюзионной части;
- ✓ Упрощенная система снятия оттисков;
- ✓ Самая технологичная и расширенная линейка ортопедических компонентов, позволяющая сделать конструкцию любой сложности.
- ✓ Все цифровые решения. Наличие всех библиотек. Уникальный набор для навигационной хирургии.



Имплантаты с шестигранным соединением

ADVANCED
CLASSIC




Классический имплантат Paltop подходит для любого типа кости

IMMEDIATE SOLUTION
Dynamic



Имплантат с активной резьбой для лучшей стабилизации

PAI
PALTOP ACTIVE IMPLANT

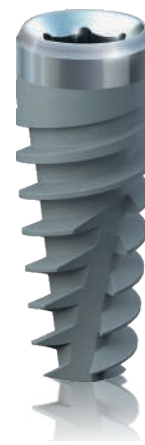

Имплантат с фрезерованной шейкой для пациентов с периодонтальными заболеваниями

Имплантаты с коническим соединением 11°

PCA
PALTOP CONICAL ACTIVE



Имплантат с конической платформой для повышенной стабильности

Dynamic
CONICAL



Имплантат с активной резьбой и конической платформой

Dynamic
CONICAL MC



Имплантат с фрезерованной шейкой и конической платформой



ИМПЛАНТАТЫ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ

ADVANCED
CLASSIC

IMMEDIATE SOLUTION
Dynamic

PAI
PALTOP ACTIVE IMPLANT



ADVANCED

CLASSIC

\$99



ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК

МИКРОРЕЗЬБА

Уменьшает нагрузку на кортикальную кость и предотвращает резорбцию.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСТЕОИНТЕГРАЦИИ

Цилиндрическая форма способствует лучшей остеоинтеграции за счет увеличения площади поверхности и контакта кости с имплантатом.

ПЕРВИЧНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Конический участок 7мм с прогрессивной трапецевидной двойной резьбой для обеспечения первичной стабильности.

БЕЗОПАСНАЯ УСТАНОВКА

Закругленный пассивный аппекс атравматичен для прилегающих к остеотомическому отверстию анатомических структур.

ОТСУТСТВИЕ РЕЗОРБЦИИ

Дизайн шейки имплантата, переключение платформ, позволяют сохранить кость и мягкие ткани и как следствие предотвратить резорбцию.

ДВОЙНАЯ РЕЗЬБА

Двойная резьба с оптимальным шагом 0,8мм для быстрой установки имплантата и лучшей первичной стабильности.




\$12




Платформа	NP	SP	WP
Заглушка имплантата	Cover Screw		
Артикул	80-70007	80-70001	80-70029

*Заглушка идёт в комплекте с имплантатом

УЗКАЯ ПЛАТФОРМА	
Ø3.25mm	
L mm	
10.0 mm	20-70018
11.5 mm	20-70019
13.0 mm	20-70020
16.0 mm	20-70021

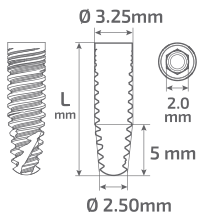

СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА			
Ø3.75mm		Ø4.2mm	
L mm		L mm	
8.0 mm	20-70017	6.0 mm	20-70005
10.0 mm	20-70001	8.0 mm	20-70006
11.5 mm	20-70002	10.0 mm	20-70007
13.0 mm	20-70003	11.5 mm	20-70008
16.0 mm	20-70004	13.0 mm	20-70009
		16.0 mm	20-70010

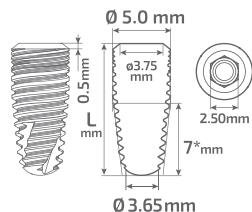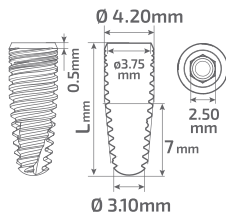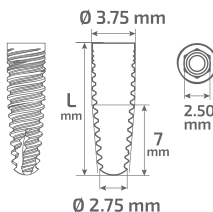



IMMEDIATE SOLUTION Dynamic

\$99 NEW



ВНУТРЕННИЙ ШЕСТИГРАННИК

ЭСТЕТИКА
В конструкцию имплантатов DYNAMIC заложено переключение платформ, позволяющее достичь высоких эстетических результатов за счет сохранения кости и, как следствие, мягких тканей.

МИКРОРЕЗЬБА
Для уменьшения нагрузки на кортикальную кость.

ДВОЙНАЯ РЕЗЬБА
Двойная резьба с оптимальным шагом 0,8мм. для быстрого внедрения имплантата и лучшей стабильности.

ПЕРВИЧНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
Активная коническая прогрессивная резьба 7мм, которая врезается в кость, тем самым, уменьшая риск отторжения, обеспечивая хорошую первичную стабильность.

АКТИВНЫЙ АПЕКС Обеспечивает вариабельность погружения на заданную глубину.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСТЕОИНТЕГРАЦИИ
Цилиндрическая форма способствует остеоинтеграции за счет увеличения площади поверхности и контакта кости с имплантатом.

\$ 12

Платформа	NP(Ø3.0)	NP(Ø3.25)	SP	WP
Заглушка имплантата			Cover Screw	
Артикул	80-70100	80-70007	80-70001	80-70029

*Заглушка идёт в комплекте с имплантатом

**УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
ТИП РЕЗЬБЫ ДЛЯ БОЛЕЕ ЛУЧШЕЙ
СТАБИЛЬНОСТИ ИМПЛАНТАТА,
ОСОБЕННО В МЯГКОМ ТИПЕ КОСТИ**

*СОВМЕСТИМ СО ВСЕЙ ЛИНЕЙКОЙ ПРОТЕТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ ADVANCED											
УЗКАЯ ПЛАТФОРМА				СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА				ШИРОКАЯ ПЛАТФОРМА			
Ø3.00mm		Ø3.25mm		Ø3.75mm		Ø4.2mm		Ø5.0mm		Ø6.0mm	
L mm		L mm		L mm		L mm		L mm		L mm	
						6.0 mm	21-70005	6.0 mm	21-70011	6.0 mm	21-70022
						8.0 mm	21-70006	8.0 mm	21-70012	8.0 mm	21-70023
10.0 mm	21-70034	10.0 mm	21-70018	10.0 mm	21-70001	10.0 mm	21-70007	10.0 mm	21-70013	10.0 mm	21-70024
11.5 mm	21-70035	11.5 mm	21-70019	11.5 mm	21-70002	11.5 mm	21-70008	11.5 mm	21-70014	11.5 mm	21-70025
13.0 mm	21-70036	13.0 mm	21-70020	13.0 mm	21-70003	13.0 mm	21-70009	13.0 mm	21-70015	13.0 mm	21-70026
16.0 mm	21-70037	16.0 mm	21-70021	16.0 mm	21-70004	16.0 mm	21-70010	16.0 mm	21-70016	16.0 mm	21-70027

Ø 3.00mm

L mm

2.0 mm

5 mm

Ø 2.50mm

Ø 3.25mm

L mm

2.0 mm

5 mm

Ø 2.50mm

Ø 3.75 mm

L mm

2.50 mm

7 mm

Ø 2.75 mm

Ø 4.20mm

L mm

0.5mm

ø3.75 mm

2.50mm

7 mm

Ø 3.10mm

Ø 5.0 mm

L mm

0.5mm

ø3.75 mm

2.50mm

7* mm

Ø 3.65mm

Ø 6.0mm

L mm

0.5mm

ø 4.75 mm

4.50mm


7* mm

Ø 4.6mm



ИМПЛАНТАТ С
ФРЕЗЕРОВАННОЙ
ШЕЙКОЙ

\$99 **NEW**

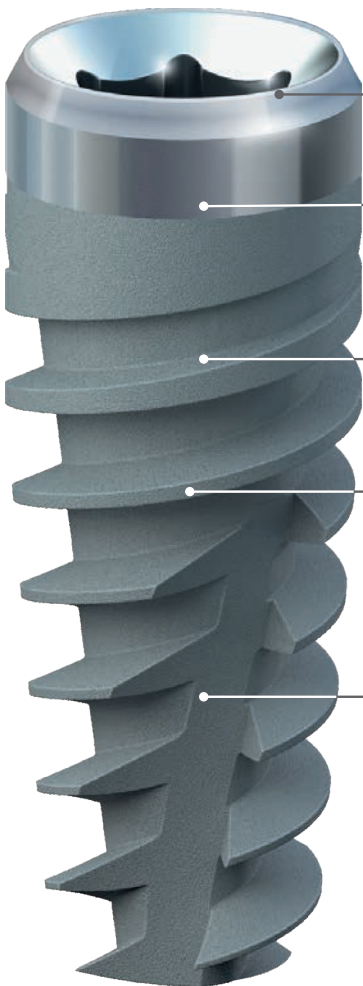

• ЭСТЕТИКА

Переключение платформ обеспечивает высокую эстетику за счет сохранения кости и, как следствие, мягких тканей.

• ФРЕЗЕРОВАННАЯ ШЕЙКА $h=1,5\text{ mm}$

Фрезерованная шейка предотвращает переимплантит.

• ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

Цилиндрическая форма способствует увеличению площади контакта с костной тканью.

• ДВОЙНАЯ РЕЗЬБА

Двойная V-образная резьба, с оптимальным шагом 2,4 мм, способствует более точной и быстрой установки имплантата.

• БОЛЕЕ АГРЕССИВНАЯ АПИКАЛЬНАЯ РЕЗЬБА

Позволяет получить лучшую первичную стабильность в кости 3-4 типа.

Клинические преимущества

- Предотвращение переимплантита.
- Устанавливается субкрестально.



\$12

Платформа	NP	SP	WP
Заглушка имплантата	Cover Screw		
Артикул	80-70007	80-70001	80-70029

*Заглушка идёт в комплекте с имплантатом

*СОВМЕСТИМ СО ВСЕЙ ЛИНЕЙКОЙ ПРОТЕТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ ADVANCED

УЗКАЯ ПЛАТФОРМА	СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА				ШИРОКАЯ ПЛАТФОРМА
Ø3.25mm	Ø3.75mm	Ø4.2mm	Ø5.0mm		Ø6.0mm
L mm	L mm	L mm	L mm		L mm
10.0 mm 29-70018	8.0 mm 29-70017	6.0 mm 29-70005	6.0 mm 29-70011		6.0 mm 29-70022
11.5 mm 29-70019	10.0 mm 29-70001	8.0 mm 29-70006	8.0 mm 29-70012		8.0 mm 29-70023
13.0 mm 29-70020	11.5 mm 29-70002	10.0 mm 29-70007	10.0 mm 29-70013		10.0 mm 29-70024
16.0 mm 29-70021	13.0 mm 29-70003	11.5 mm 29-70008	11.5 mm 29-70014		11.5 mm 29-70025
	16.0 mm 29-70004	13.0 mm 29-70009	13.0 mm 29-70015		13.0 mm 29-70026
		16.0 mm 29-70010	16.0 mm 29-70016		16.0 mm 29-70027





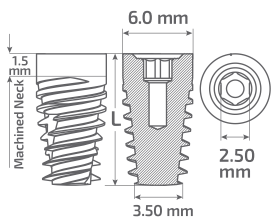


ТАБЛИЦА ТОРКОВ

Протетика	Торк (Нсм)
Формирователь	15
Абатменты Peek	10-15
Абатменты Multi-Unit прямой	30-35
Абатменты Multi-Unit угловой	20-25
Абатменты Single-Unit	30-35
Абатменты Equator	35
Шаровидные Абатменты	30-35
Винт Multi-Unit	20-25
Винт Single-Unit	20-25
Винт абатмента узкой платформы	25-30
Винт абатмента стандартной платформы	30-35
Винт абатмента широкой платформы	30-35
Винт абатмента конической платформы	25
Имплантат	30-50

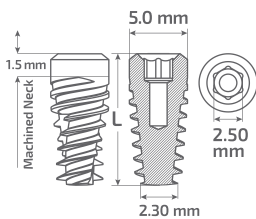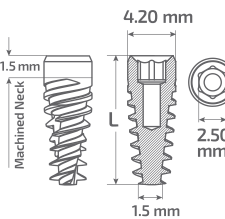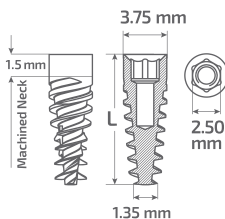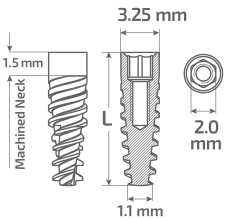

ПРОТЕТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

ДЛЯ ИМПЛАНТАТОВ С ВНУТРЕННИМ ШЕСТИГРАННИКОМ

Имплантаты Ø 3,0 mm, Ø 3,25 mm – узкая платформа
 Имплантаты Ø 3,75 mm, Ø 4,2 mm, Ø 5,0 – стандартная платформа
 Имплантаты Ø 6,0 – широкая платформа







ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ

Формирователи десны устанавливаются на период заживления десны (6-8 недель), с целью получения требуемого профиля прорезывания мягких тканей.
Формирователь десны с прямым профилем устанавливается как в стандартной ситуации, так и при протезировании на Locator.


\$21


С ВОГНУТЫМ ПРОФИЛЕМ

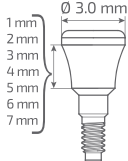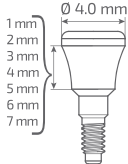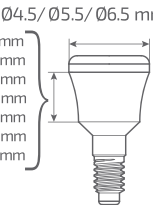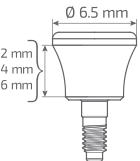УЗКАЯ ПЛАТФОРМА		1mm	2mm	3mm	4mm	5mm		
	Ø 3.0 mm							
		55-70046	55-70047	55-70048	55-70049	55-70050		
УЗКАЯ ПЛАТФОРМА		1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm	7mm
	Ø 4.0 mm							
		55-70009	55-70010	55-70011	55-70014	55-70015	55-70018	55-70019
СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА		1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm	7mm
	Ø 4.5 mm							
		55-70003	55-70001	55-70004	55-70002	55-70013	55-70020	55-70021
	Ø 5.5 mm							
		55-70005	55-70006	55-70007	55-70008	55-70016		
	Ø 6.5 mm							
				55-70060	55-70061	55-70062		
ШИРОКАЯ ПЛАТФОРМА		2mm	4mm	6mm				
	Ø 6.5 mm							
		55-70022	55-70023	55-70024				

\$21

С ПРЯМЫМ ПРОФИЛЕМ

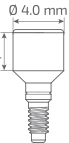УЗКАЯ ПЛАТФОРМА		2mm	3mm	5mm	ШИРОКАЯ ПЛАТФОРМА		2mm	4mm	6mm
	Ø 4.0 mm					Ø 6.5 mm			
		55-70028	55-70029	55-70030			55-70031	55-70032	55-70033

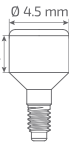СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА		2mm	3mm	5mm	СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА		2mm	3mm	5mm
	Ø 4.5 mm					Ø 5.5 mm			
		55-70025	55-70026	55-70027			55-70034	55-70035	55-70036



СЛЕПОЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

Компоненты имеют цветовую кодировку, указывающую на соответствующую платформу.

ВИНТЫ В КОМПЛЕКТЕ

УЗКАЯ ПЛАТФОРМА Ø3 0mm Ø3 25mm								
Трансфер для открытой ложки	Узкий трансфер для открытой ложки	Узкий и длинный трансфер для открытой ложки	Трансфер для закрытой ложки	Аналог имплантата	Трансфер с абатментом для закрытой ложки	Скан-абатмент	Аналог имплантата для цифровой модели	Винт абатмента
\$20	\$22	\$22	\$20	\$21	\$46	\$55	\$31	\$12
56-70016	56-70033	56-70046	56-70017	56-70015	56-70035	30-70102	30-70521	80-70010

СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА Ø3.75mm, Ø4.2mm, Ø5.0mm										
Трансфер для открытой ложки Ø4.5mm	Трансфер для открытой ложки Ø6.0mm	Узкий, длинный трансфер для открытой ложки	Узкий трансфер для открытой ложки	Трансфер для открытой ложки короткий	Угловой трансфер для закрытой ложки 15°	Угловой трансфер для закрытой ложки 25°	Трансфер для закрытой ложки	Трансфер с колпачком для закрытой ложки Ø6.0mm	Аналог имплантата	Аналог имплантата для цифровой модели
\$20	\$22	\$22	\$22	\$22	\$53	\$53	\$20	\$46	\$18	\$31
56-70005	56-70050	56-70045	56-70032	56-70031	56-70043	56-70044	56-70006	56-70034	56-70002	30-70520

СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА		ШИРОКАЯ ПЛАТФОРМА Ø6.0mm						
Скан-абатмент	Винт абатмента	Трансфер для открытой ложки	Трансфер для закрытой ложки	Аналог имплантата	Трансфер с колпачком для закрытой ложки	Скан-абатмент	Аналог имплантата для цифровой модели	Винт абатмента
\$55	\$12	\$20	\$20	\$18	\$46	\$55	\$31	\$12
30-70101	80-70002	56-70029	56-70030	56-70028	56-70036	30-70106	30-70524	80-70002



ЦИФРОВЫЕ БИБЛИОТЕКИ
В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ
НА САЙТЕ paltop.ru



ТИТАНОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ CAD CAM

\$27

Применяются для изготовления индивидуальных циркониевых абатментов.

УЗКАЯ ПЛАТФОРМА Ø3.0mm, Ø3.25mm					ВИНТ В КОМПЛЕКТЕ				
С шестигранником	0.5mm	1mm	2mm	3mm	Без шестигранника	0.5mm	1mm	2mm	3mm
	L4mm								
	40-70215	40-70322	40-70295	40-70217		40-70216	40-70323	40-70296	40-70218
С шестигранником	0.5mm	1mm	2mm	3mm	Без шестигранника	0.5mm	1mm	2mm	3mm
	L6mm								
	40-70219	40-70324	40-70297	40-70221		40-70220	40-70325	40-70298	40-70222
СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА Ø3.75mm, Ø4.2mm, Ø5.0mm									
С шестигранником	0.5mm	1mm	2mm	3mm	Без шестигранника	0.5mm	1mm	2mm	3mm
	L4mm								
	40-70207	40-70318	40-70291	40-70209		40-70208	40-70319	40-70292	40-70210
С шестигранником	0.5mm	1mm	2mm	3mm	Без шестигранника	0.5mm	1mm	2mm	3mm
	L6mm								
	40-70211	40-70320	40-70293	40-70213		40-70212	40-70321	40-70294	40-70214
ШИРОКАЯ ПЛАТФОРМА Ø6.0mm									
С шестигранником	0.5mm	2mm	Без шестигранника	0.5mm	2mm				
	L4mm								
	40-70223	40-70326		40-70224	40-70327				
С шестигранником	0.5mm	2mm	Без шестигранника	0.5mm	2mm				
	L6mm								
	40-70225	40-70328		40-70226	40-70329				

УЗКАЯ ПЛАТФОРМА

Винт абатмента

\$12

80-70010

СТАНДАРТНАЯ, ШИРОКАЯ ПЛАТФОРМЫ

Винт абатмента

\$12

80-70002

УЗКАЯ ПЛАТФОРМА

Винт абатмента

\$12



80-70010

СТАНДАРТНАЯ, ШИРОКАЯ ПЛАТФОРМЫ

Винт абатмента

\$12



80-70002



ТИТАНОВЫЕ ОСНОВАНИЯ СО СКОСОМ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОГО ОТДЕЛА

\$27


ВИНТ В КОМПЛЕКТЕ

УЗКАЯ ПЛАТФОРМА Ø3.0mm, Ø3.25mm				СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА Ø3.75mm, Ø4.2mm, Ø5.0mm			
С шестигранником	0,5mm	2mm	3mm	С шестигранником	0,5mm	2mm	3mm
	40-70302	40-70303	40-70304		40-70299	40-70300	40-70301

ТИТАНОВЫЕ ОСНОВАНИЯ С УГЛОВОЙ ШАХТОЙ ВИНТА

\$65

УЗКАЯ ПЛАТФОРМА Ø3.0mm, Ø3.25mm					
Без шестигранника	L4mm		С шестигранником	L4mm	
	1mm	3mm		1mm	3mm
	40-70232	40-70234		40-70231	40-70233
					Винт для угловой шахты
					\$30
СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА Ø3.75mm, Ø4.2mm, Ø5.0mm					
Без шестигранника	L4mm		С шестигранником	L4mm	
	1mm	3mm		1mm	3mm
	40-70228	40-70230		40-70227	40-70229
					Винт для угловой шахты
					\$30

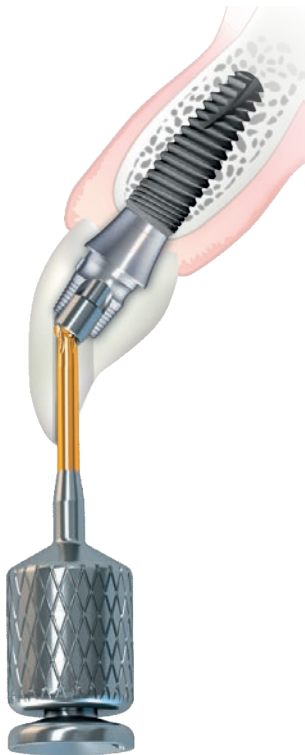

Ручная отвертка (угловая шахта)	Отвертка для динамометрического ключа (угловая шахта)
\$80	\$55
60-70152	60-70153



ТИТАНОВЫЕ ОСНОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ШЕСТИГРАННИКОМ

\$27

УЗКАЯ ПЛАТФОРМА		СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА	
1mm	2mm	1mm	2mm
40-70108	40-70109	40-70106	40-70107

ПРЯМЫЕ ТИТАНОВЫЕ АБАТМЕНТЫ


\$41

Прямые абатменты имеют разную форму десневой части, прямой или вогнутый профиль, для фронтального отдела зубов и жевательной группы, абатменты без уступа для индивидуализирования контура десны.

ВИНТ В КОМПЛЕКТЕ


УЗКАЯ ПЛАТФОРМА Ø3.0mm, Ø3.25mm

Абатмент с вогнутым профилем Ø4.0mm

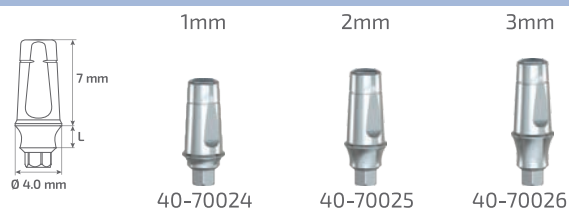

40-70024 40-70025 40-70026

Анатомический абатмент Ø4.0mm

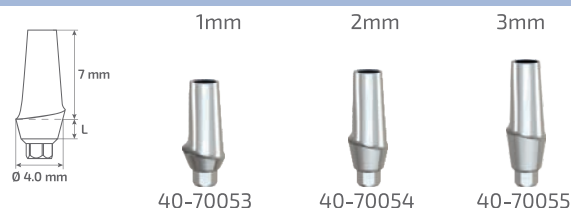

40-70053 40-70054 40-70055

Анатомический абатмент с вогнутым профилем Ø4.0mm



40-70056 40-70057 40-70058

Без уступа



40-70311


СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА Ø3.75mm, Ø4.2mm, Ø5.0mm

Абатмент с вогнутым профилем Ø4.5mm




40-70001 40-70002 40-70003 40-70012

Абатмент с вогнутым профилем Ø5.5mm

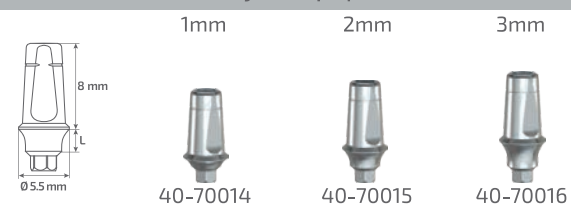

40-70014 40-70015 40-70016

Анатомический абатмент Ø4.5mm

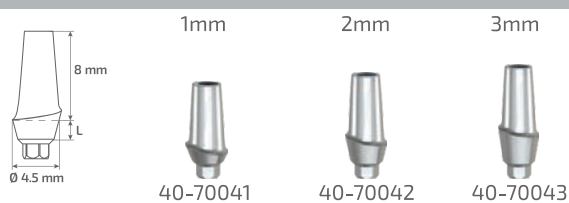

40-70041 40-70042 40-70043

Анатомический абатмент с вогнутым профилем Ø4.5mm



40-70044 40-70045 40-70046

Без уступа



40-70013 40-70115

ШИРОКАЯ ПЛАТФОРМА Ø6.0mm

Анатомический абатмент Ø6.5mm



40-70124 40-70125 40-70126 40-70127

Анатомический абатмент с вогнутым профилем Ø6.5mm



40-70120 40-70121 40-70122 40-70123



УГЛОВЫЕ ТИТАНОВЫЕ АБАТМЕНТЫ

\$41

Компания RALTOP представляет два типа угловых абатментов: 15° и 20° - узкая платформа; 15° и 25° - стандартная платформа, для расширения возможностей протезирования. Данные абатменты также могут быть индивидуально доработаны.

ВИНТ В КОМПЛЕКТЕ

УЗКАЯ ПЛАТФОРМА Ø3.0mm, Ø3.25mm						
Угловой анатомический абатмент 15°			Угловой анатомический абатмент с вогнутым профилем 15°			Без уступа 15°
	1mm	2mm	3mm	1mm	2mm	3mm
	 40-70027	 40-70028	 40-70029	 40-70059	 40-70060	 40-70061
						 40-70312
Угловой анатомический абатмент 20°			Угловой анатомический абатмент с вогнутым профилем 20°			Без уступа 20°
	1mm	2mm	3mm	1mm	2mm	3mm
	 40-70030	 40-70031	 40-70032	 40-70062	 40-70063	 40-70064
						 40-70313
СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА Ø3.75mm, Ø4.2mm, Ø5.0mm						
Угловой анатомический абатмент 15°			Угловой анатомический абатмент с вогнутым профилем 15°			
	1mm	2mm	3mm	1mm	2mm	3mm
	 40-70006	 40-70007	 40-70008	 40-70047	 40-70048	 40-70049
						 40-70074
Угловой анатомический абатмент 25°			Угловой анатомический абатмент с вогнутым профилем 25°			
	1mm	2mm	3mm	1mm	2mm	3mm
	 40-70009	 40-70010	 40-70011	 40-70050	 40-70051	 40-70052
Без уступа 15°		Узкий		Без уступа 25°		
	 40-70004		 40-70116		 40-70005	

ВРЕМЕННЫЕ АБАТМЕНТЫ РЕЕК

\$38

Временные абатменты PALTOP изготовлены из РЕЕК полимера, один из самых прочных материалов, что делает его особенно подходящим в дентальном протезировании, в качестве простого и эффективного решения временных реставраций во фронтальном отделе. Хорошо соединяется с акриловыми и композитными материалами.

ВИНТ В КОМПЛЕКТЕ

УЗКАЯ ПЛАТФОРМА Ø3.0mm, Ø3.25mm											
ПРЯМОЙ						УГЛОВОЙ 15°					
		1mm	2mm	3mm				1mm	2mm	3mm	
		45-70020	45-70021	45-70022				45-70023	45-70024	45-70025	

СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА Ø3.75mm, Ø4.2mm, Ø5.0mm											
ПРЯМОЙ						УГЛОВОЙ 15°					
		1mm	2mm	3mm				1mm	2mm	3mm	
		45-70001	45-70002	45-70003				45-70006	45-70007	45-70008	

ВРЕМЕННЫЕ ТИТАНОВЫЕ АБАТМЕНТЫ

\$40

Используются для реставраций и каркасов с винтовой фиксацией на имплантатах. Могут быть трансформированы до нужной высоты. Высота h=10mm.







УЗКАЯ ПЛАТФОРМА		СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА				ШИРОКАЯ ПЛАТФОРМА	
С шестигранником	Без шестигранника	С шестигранником		Без шестигранника		С шестигранником	Без шестигранника
0.5 mm	0.5 mm	0.5 mm	0.5 mm	0.5 mm	0.5 mm	0.5 mm	0.5 mm
45-70031	45-70032	45-70029	45-70030	45-70042	45-70043	45-70042	45-70043
2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm
45-70055	45-70056	45-70051	45-70052	45-70059	45-70060	45-70059	45-70060
3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
45-70057	45-70058	45-70053	45-70054	45-70061	45-70062	45-70061	45-70062

ВЫЖИГАЕМЫЕ АБАТМЕНТЫ БЕЗЗОЛЬНЫЕ

\$30







Используются для моделирования индивидуальных абатментов, с последующей отливкой из стоматологических сплавов.

ВИНТ В КОМПЛЕКТЕ

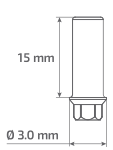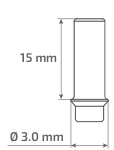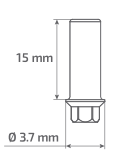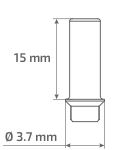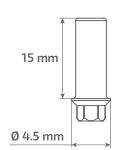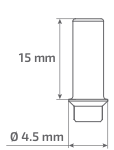УЗКАЯ ПЛАТФОРМА		СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА		ШИРОКАЯ ПЛАТФОРМА	
С шестигранником	Без шестигранника	С шестигранником	Без шестигранника	С шестигранником	Без шестигранника
					
46-70012	46-70017	46-70013	46-70018	46-70033	46-70034
					

ПРИЛИВАЕМЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АБАТМЕНТЫ С ХРОМОКОБАЛЬТОВЫМ ОСНОВАНИЕМ

\$35

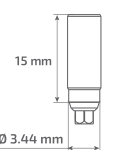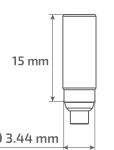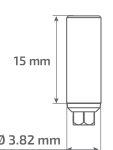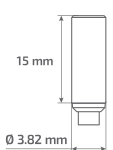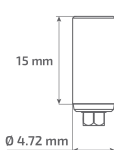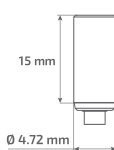УЗКАЯ ПЛАТФОРМА		СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА		ШИРОКАЯ ПЛАТФОРМА	
С шестигранником	Без шестигранника	С шестигранником	Без шестигранника	С шестигранником	Без шестигранника
					
40-70078	40-70178	40-70077	40-70177	40-70174	40-70175
					

ВИНТЫ В КОМПЛЕКТЕ

\$12

Уникальная система нераскручивающихся винтов. Идут в комплекте с ортопедическими компонентами.

УЗКАЯ ПЛАТФОРМА имплантат Ø3.25mm				СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА имплантаты Ø3.75, Ø4.2, Ø5.0mm					
Винт трансфера для открытой ложки узкий	Винт трансфера для открытой ложки	Винт трансфера для закрытой ложки	Винт абатмента	Винт трансфера для открытой ложки короткий	Винт трансфера для открытой ложки узкий	Винт трансфера для открытой ложки	Винт трансфера для закрытой ложки	Винт абатмента	Винт формирователь
									
80-70033	80-70008	80-70009	80-70010	80-70031	80-70032	80-70003	80-70004	80-70002	80-70041

СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА имплантаты Ø3.75, Ø4.2, Ø5.0mm			ШИРОКАЯ ПЛАТФОРМА имплантаты Ø6mm			MULTI-UNIT	
Винт цифрового аналога	Винт трансфера для открытой ложки	Винт трансфера для открытой ложки высокий	Винт трансфера для открытой ложки	Винт трансфера для закрытой ложки	Винт абатмента	Винт трансфера для открытой ложки	Винт абатмента
							
80-70048	80-70006	80-70045	80-70036	80-70080	80-70002	80-70023	80-70005


MULTI-UNIT

Широкий спектр решений для реставраций мостовидными конструкциями с винтовой фиксацией на имплантатах.

Компания PALTOP предлагает абатменты системы Multi-Unit с разной степенью ангуляции и разной высотой десны. Абатменты Multi-Unit подходят для всех видов имплантатов.

Угловые абатменты PALTOP системы Multi-Unit - одни из немногих, позволяющие использовать силу закручивания винта с торком 30Нсм, что обеспечивает дополнительную стабильность протеза.

УЗКАЯ ПЛАТФОРМА Ø3.0mm, Ø3.25mm											
Прямой						Угловой 17°			Винт углового MU		
\$41	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	\$70	3mm	4,5mm	\$12		
	42-70011	42-70012	42-70013	42-70014	42-70015		42-70016	42-70017	80-70017		

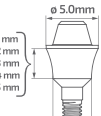СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА Ø3.75mm, Ø4.2mm, Ø5.0mm													
Прямой						Угловой 17°				Угловой 30°			Винт углового MU
\$41	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	\$70	2,5mm	3,25mm	4mm	\$70	3,5mm	4,5mm	\$12
													
	42-70001	42-70002	42-70003	42-70004	42-70005		42-70006	42-70010	42-70007		42-70008	42-70009	80-70018

ШИРОКАЯ ПЛАТФОРМА Ø6.0mm											
Прямой					Угловой 17°						
\$41	1mm	2mm	3mm	4mm	\$70	3mm					
	42-70023	42-70024	42-70025	42-70026		42-70027					

ВИНТ В КОМПЛЕКТЕ

Трансфер для закрытой ложки	Трансфер для открытой ложки	Трансфер для открытой ложки длинный	Трансфер с абатментом для Multi-Unit	Аналог Multi-Unit	Формирователь десны трапециевидный	Формирователь десны	Временный абатмент T1, высота 10 mm	Временный абатмент T1, высота 15mm	выжигаемый абатмент	Титановое основание для Multi-Unit
56-72003	56-72002	56-70047	56-70049	56-72001	55-72011	55-72010	42-70020	42-70030	42-70021	42-70022
Титановое основание для циркония	Скан-абатмент	Аналог для цифровой модели	Винт трансфер откобтой ложки	Винт длинного трансфера для открытой ложки	Винт для Multi-Unit	Винт трансфера, абатмента для закрытой ложки	Винт трансфера, абатмента для открытой ложки	Винт цифрового аналога	Винт формирователь	
42-70028	30-70103	30-70523	80-70028	80-70045	80-70005	80-70002	80-70006	80-70048	80-70041	



SINGLE-UNIT (С НАРУЖНЫМ ШЕСТИГРАННИКОМ)

\$44

Уникальная система для винтовой фиксации одиночных реставраций на имплантатах.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ (One Abutment - One Time)

- Абатменты Single-Unit вкручиваются в имплантат после его установки, либо после его остеоинтеграции. Все этапы протезирования производятся с уровня абатмента.
- Данные абатменты не имеют дополнительного винта для соединения с имплантатом, что обеспечивает герметичность.

УЗКАЯ ПЛАТФОРМА Ø3.0mm, Ø3.25mm

NP

1mm

2mm

3mm

4mm

41-70151

41-70152

41-70153

41-70154

СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА Ø3.75mm, Ø4.2mm, Ø5.0mm

SP

1mm

2mm

3mm

4mm

41-70051

41-70052

41-70053

41-70054

ШИРОКАЯ ПЛАТФОРМА Ø6.0mm

WP

1mm

2mm

3mm

4mm

41-70159

41-70160

41-70161

41-70162

ВИНТ В КОМПЛЕКТЕ

Трансфер для закрытой ложки

Трансфер для открытой ложки

Трансфера для открытой ложки длинный

Аналог Single-Unit

Формирователь десны

Временный абатмент Ti с шестигранником

Лабораторный выжигаемый абатмент с шестигранником

Титановое основание для Single-Unit без шестигранника

\$24

\$24

\$24

\$20

\$28

\$44

\$20

\$40

Временный титановый абатмент без шестигранника

Выжигаемый абатмент без шестигранника

Скан-абатмент

Аналог для цифровой модели

Винт Single-Unit для закрытой ложки

Винт трансфера для открытой ложки

\$41

\$26

\$55

\$31

\$12

\$12

ТИТАНОВАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ УПАКОВКА:

Все изделия PALTOR, включая протетические компоненты, поставляются в стерильных упаковках.



ВЫСОКИЕ ЗАГЛУШКИ **NEW**

Узкая платформа	Высокая заглушка L 3.5mm	Винт для фиксации Тi мембраны, L 1.4mm, Ø0.3mm	Стандартная платформа	Высокая заглушка L 3.5mm	Винт для фиксации Тi мембраны, L 1.4mm, Ø0.3mm	Титановая 3D Тi мембрана
	 \$50	 \$25		 \$50	 \$25	 \$100
	TH-AVG88003	TH-AVG88005		TH-AVG88002	TH-AVG88001	Ti3D-0001



ОТВЕРТКИ ДЛЯ ВЫСОКОЙ ЗАГЛУШКИ И ФИКСАЦИИ Тi МЕМБРАНЫ

Отвертка Ø1.7 короткая для высокой заглушки L 3.5mm		Em046554	\$70
Отвертка Ø1.7 длинная для высокой заглушки L 3.5mm		Em046556	\$70
Отвертка короткая для винта Тi мембраны		Em046558	\$70
Отвертка длинная для винта Тi мембраны		Em046560	\$70

Держатель для отвертки






BHS-01110

\$37

ШАРОВИДНЫЕ АБАТМЕНТЫ

\$41

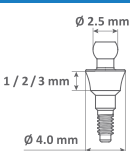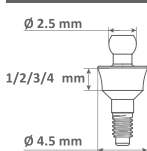УЗКАЯ ПЛАТФОРМА Ø3.0mm, Ø3.25mm				СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА Ø3.75mm, Ø4.2mm, Ø5.0mm			
	1mm	2mm	3mm		1mm	2mm	3mm
40-70033	40-70034	40-70035		40-70017	40-70018	40-70019	40-70290
Матрица Ультра-эластичная 350 гр	Матрица Ультра-мягкая 500 гр	Матрица Мягкая 900 гр	Матрица Стандартная 1300 гр	Металлическая втулка	Аналог шаровидного абатмента		

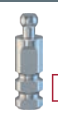 \$20	 \$20	 \$20	 \$20	 \$20	 \$18
40-70131	40-70132	40-70023	40-70065	40-70022	56-70013

АБАТМЕНТЫ LOCATOR PREMIUM CLASS



\$120

Гибкая система аттачменты LOCATOR премиум класса предназначена для фиксации полных зубных протезов на двух и более имплантатах.

УЗКАЯ ПЛАТФОРМА Ø3.0mm, Ø3.25mm						СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА Ø3.75mm, Ø4.2mm, Ø5.0mm					
1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm
											
40-70088	40-70089	40-70090	40-70091	40-70092	40-70093	40-70082	40-70083	40-70084	40-70085	40-70086	40-70087

Набор матриц (угол отклонения до 10°)	Набор матриц (угол отклонения от 10° до 20°)	Слепочный трансфер	Аналог locator Ø4.0 mm	Ключ для установки/извлечения locator и матрицы
 \$50	 \$50	 \$35	 \$35	 \$150
40-70081	40-70112	56-70026	56-70027	60-70133



АБАТМЕНТЫ EQUATOR



\$89 NEW

Предназначены для фиксации полных съемных протезов на имплантатах, избавляющие от проблем, связанных с подвижностью протезов во рту. За счет гибких втулок, экватор работает как амортизатор, выравнивая угол наклона до 50° с двух сторон, что уменьшает нагрузку на альвеолярный отросток и, как следствие, резорбцию.

УЗКАЯ ПЛАТФОРМА Ø3.0mm, Ø3.25mm						
0,5mm	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm
40-70244	40-70245	40-70246	40-70247	40-70248	40-70249	40-70250
СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА Ø3.75mm, Ø4.2mm, Ø5.0mm						
0,5mm	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm
40-70237	40-70238	40-70239	40-70240	40-70241	40-70242	40-70243
ШИРОКАЯ ПЛАТФОРМА Ø6.0mm						
0,5mm	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm
40-70251	40-70252	40-70253	40-70254	40-70255	40-70256	40-70257




УНИКАЛЬНЫЙ
ВОГНУТЫЙ ДИЗАЙН
ДЛЯ НАИЛУЧШИХ
ЭСТЕТИЧЕСКИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

Матрица Стальная	Матрица Жесткая 2700 гр	Матрица Стандартная 1800 гр	Матрица Мягкая 1200 гр	Матрица Ультра-мягкая 600 гр	Матрица Лабораторная	Колпачок из анодированного металла	Защитный диск жесткий	Защитный диск мягкий
---------------------	-------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	------------------------------------	-------------------------	--	-----------------------------	----------------------------

40-70287	40-70282	40-70283	40-70284	40-70285	40-70286	40-70305	40-70288	40-70289

Слепочный трансфер	Аналог	Ключ для установки/извлечения
56-70042	56-70041	60-70161

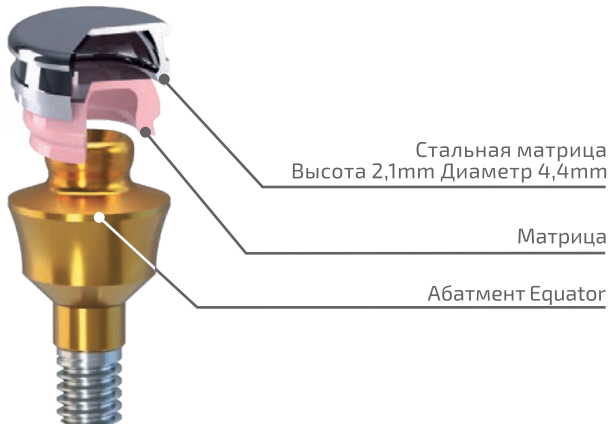

НАБОР ПРЯМЫХ МАТРИЦ ДЛЯ ЭКВАТОРА

\$55 **NEW**



40-70306

Матрица стальная		40-70287
Матрица лабораторная		40-70286
Матрица жесткая 2700 гр.		40-70282
Матрица стандартная 1800 гр.		40-70283
Матрица мягкая 1200 гр.		40-70284
Матрица ультра-мягкая 600 гр.		40-70285
Защитный диск жесткий		40-70288


НАБОР УГЛОВЫХ МАТРИЦ ДЛЯ ЭКВАТОРА

\$95 **NEW**




40-70307

Колпачок из анодированного металла		40-70305
Матрица жесткая 2700 гр.		40-70282
Матрица стандартная 1800 гр.		40-70283
Матрица мягкая 900 гр.		40-70284
Матрица ультра-мягкая 1200 гр.		40-70285
Защитный диск мягкий		40-70289

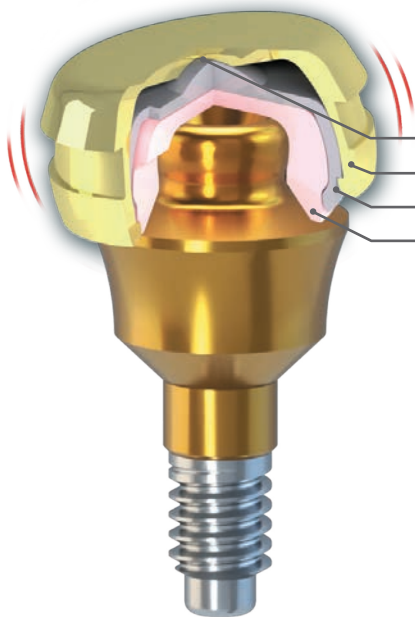

вращение металла к металлу
колпачок из анодированного металла
титановая оболочка
эластичная матрица

**Smart
BOX**

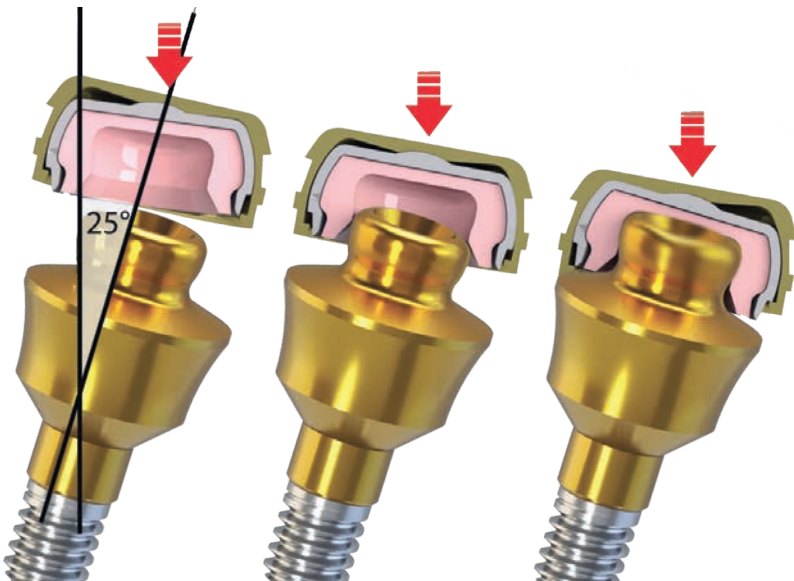


- ✓ Абатмент «экватор», выравнивающий угол наклона
- ✓ Корректная дивергенция до 50° с двух сторон

Система имплантатов имеет современное внутреннее глубокое коническое соединение 11° . Макродизайн имплантатов с коническим соединением представлен в двух вариантах: Paltop Conical Active, для более плотной кости, с двойной V-образной резьбой. Dynamic Conical и Dynamic Conical MC с более активной резьбой для лучшей стабильности в мягкой кости.

Глубокое коническое соединение 11° обеспечивает хорошую герметичность, и тем самым, уменьшает вероятность возникновения микросмещений в системе «имплантат-абатмент». Как следствие предотвращает резорбцию, поломку винтов шейки имплантата и проникновение микробов.

**ВСЕ ИМПЛАНТАТЫ С КОНИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЕМ
ИМЕЮТ ЕДИНУЮ ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ ПЛАТФОРМУ**

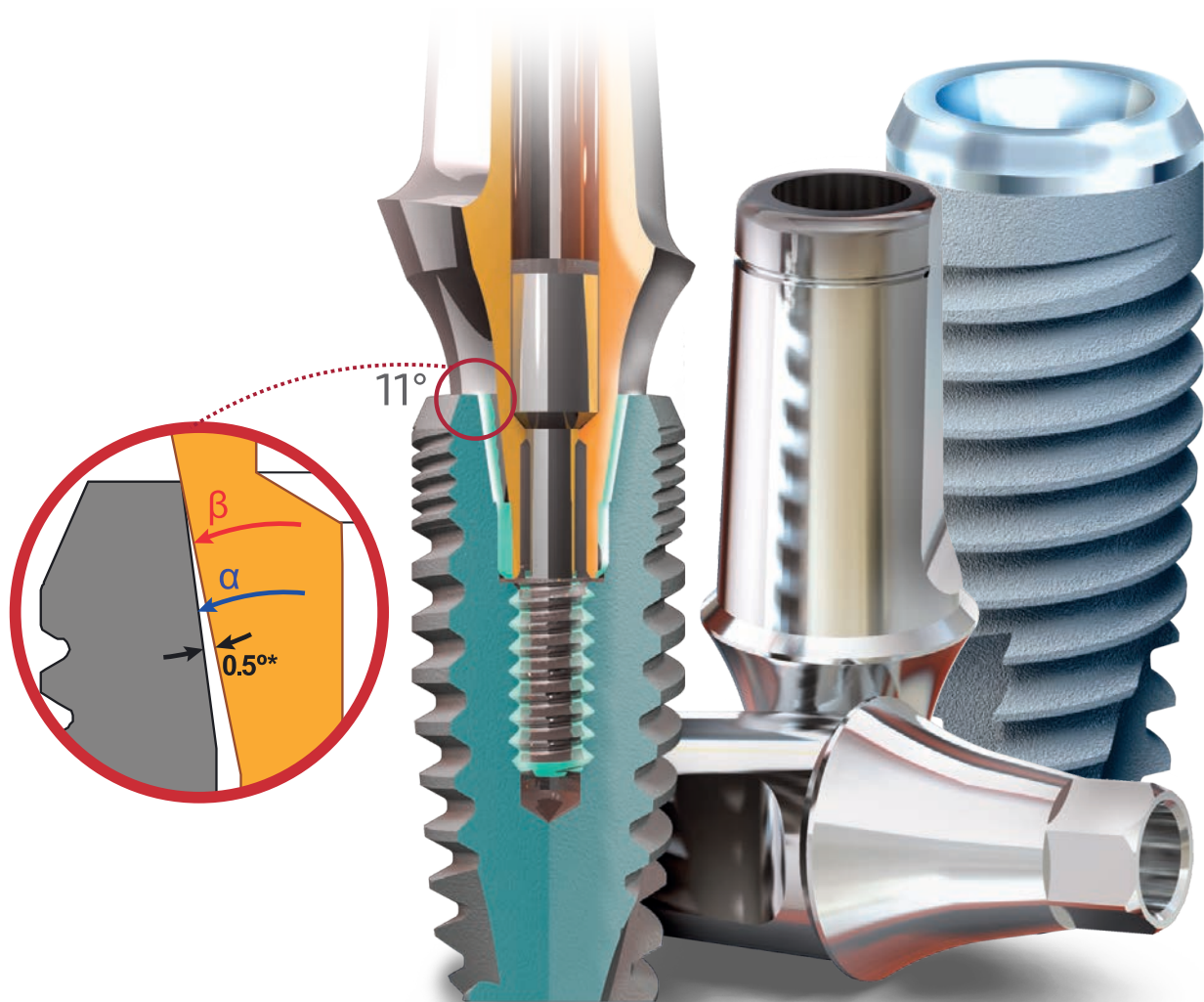

**СИСТЕМА ИМПЛАНТАТОВ
С ГЛУБОКИМ КОНИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЕМ 11°**

**\$99****ГЛУБОКОЕ КОНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ 11°****МИКРОРЕЗЬБА**

Уменьшает нагрузку на кортикальную кость и ее резорбцию.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСТЕОИНТЕГРАЦИИ

Специальная запатентованная технология очистки имплантатов обеспечивает надежную остеоинтеграцию.

ПЕРВИЧНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Конический участок 7 мм с активной трапецевидной резьбой для обеспечения первичной стабильности.

+АКТИВНЫЙ АПЕКС

Обеспечивает вариабельность погружения на заданную глубину.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЛАТФОРМ

Способствует формированию биологической ширины, снижает вероятность резорбции кости и оптимизирует эстетический результат реставрации.

ДВУХЗАХОДНАЯ РЕЗЬБА


С оптимальным шагом 0,8 мм для быстрого внедрения имплантата и лучшей первичной стабильности.

Платформа	Conical
Заглушка имплантата	Cover Screw
Артикул	80-70016


**\$ 12**

*Заглушка идёт в комплекте с имплантатом


Ø3.25mm	
L mm	
10.0 mm	22-70018
11.5 mm	22-70019
13.0 mm	22-70020
16.0 mm	22-70021

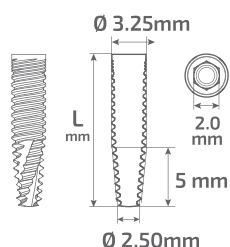


Ø3.75mm	
L mm	
8.0 mm	22-70017
10.0 mm	22-70001
11.5 mm	22-70002
13.0 mm	22-70003
16.0 mm	22-70004

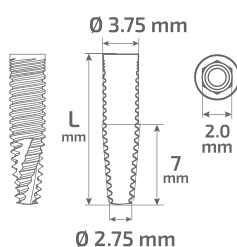

Ø4.2mm	
L mm	
6.0 mm	22-70005
8.0 mm	22-70006
10.0 mm	22-70007
11.5 mm	22-70008
13.0 mm	22-70009
16.0 mm	22-70010

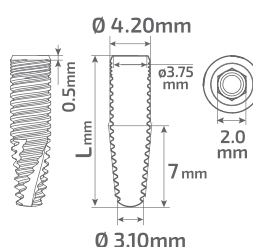

Ø5.0mm	
L mm	
6.0 mm	22-70011
8.0 mm	22-70012
10.0 mm	22-70013
11.5 mm	22-70014
13.0 mm	22-70015
16.0 mm	22-70016

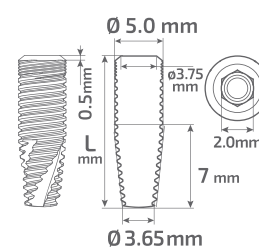



\$99

ГЛУБОКОЕ КОНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ 11°

МИКРОРЕЗЬБА

Уменьшает нагрузку на кортикальную кость и ее резорбцию.

ПЕРВИЧНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

Цилиндрическая форма способствует увеличению площади поверхности контакта кости с имплантатом.

ТОЧНАЯ УСТАНОВКА

Конический участок 7мм с активной трапецевидной резьбой для обеспечения точной установки.

АКТИВНЫЙ АПЕКС

Обеспечивает вариабельность погружения на заданную глубину.

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЛАТФОРМ

Способствует формированию биологической ширины, снижает вероятность резорбции кости.

БОЛЕЕ АКТИВНАЯ V-ОБРАЗНАЯ РЕЗЬБА

С оптимальным шагом 0,8 мм для быстрого внедрения имплантата и лучшей первичной стабильности. Снижает риск отторжения.

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
ТИП РЕЗЬБЫ ДЛЯ БОЛЕЕ ЛУЧШЕЙ
СТАБИЛЬНОСТИ ИМПЛАНТАТА,
ОСОБЕННО В МЯГКОМ ТИПЕ КОСТИ


Платформа	Conical
Заглушка имплантата	Cover Screw
Артикул	80-70016




\$12

*Заглушка идёт в комплекте с имплантатом


Ø3.25mm	
L mm	
10.0 mm	24-70018
11.5 mm	24-70019
13.0 mm	24-70020
16.0 mm	24-70021

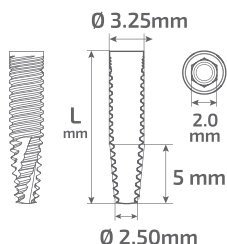


Ø3.75mm	
L mm	
8.0 mm	24-70017
10.0 mm	24-70001
11.5 mm	24-70002
13.0 mm	24-70003
16.0 mm	24-70004

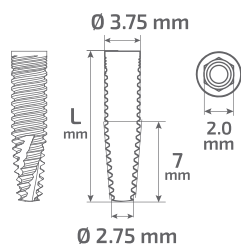

Ø4.2mm	
L mm	
6.0 mm	24-70005
8.0 mm	24-70006
10.0 mm	24-70007
11.5 mm	24-70008
13.0 mm	24-70009
16.0 mm	24-70010

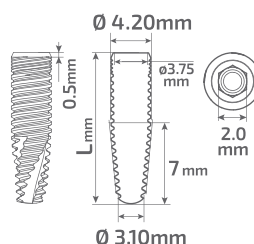

Ø5.0mm	
L mm	
6.0 mm	24-70011
8.0 mm	24-70012
10.0 mm	24-70013
11.5 mm	24-70014
13.0 mm	24-70015
16.0 mm	24-70016

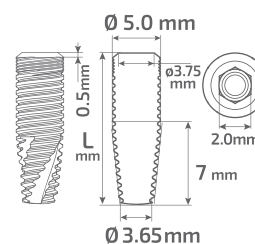

Dynamic

CONICAL MC

\$99 NEW



ГЛУБОКОЕ КОНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ 11°

Переключение платформ способствует формированию биологической ширины, снижает вероятность резорбции кости.

ВЫСОТА ФРЕЗЕРОВАННОЙ ШЕЙКИ ИМПЛАНТАТА = 0,8 мм

Фрезерованная шейка помогает предотвратить периимплантит.

БОЛЕЕ АКТИВНАЯ V-ОБРАЗНАЯ РЕЗЬБА

С оптимальным шагом 0,8 мм для лучшей первичной стабильности. Снижает риск отторжения.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОСТЕОИНТЕГРАЦИИ

Специальная запатентованная технология очистки имплантатов обеспечивает надежную остеоинтеграцию.

АКТИВНЫЙ АПЕКС

Усовершенствованный тип резьбы для более лучшей стабильности имплантата, особенно в мягком типе кости.

Ø3.25mm

L mm

10.0 mm	24-70018MC
11.5 mm	24-70019MC
13.0 mm	24-70020MC
16.0 mm	24-70021MC

Ø3.75mm

L mm

8.0 mm	24-70017MC
10.0 mm	24-70001MC
11.5 mm	24-70002MC
13.0 mm	24-70003MC
16.0 mm	24-70004MC

Ø4.2mm





L mm

6.0 mm	24-70005MC
8.0 mm	24-70006MC
10.0 mm	24-70007MC
11.5 mm	24-70008MC
13.0 mm	24-70009MC
16.0 mm	24-70010MC

Ø5.0mm

L mm

6.0 mm	24-70011MC
8.0 mm	24-70012MC
10.0 mm	24-70013MC
11.5 mm	24-70014MC
13.0 mm	24-70015MC
16.0 mm	24-70016MC

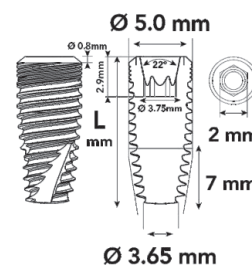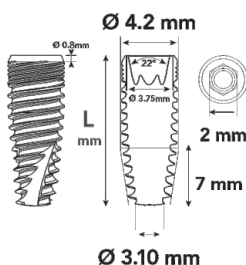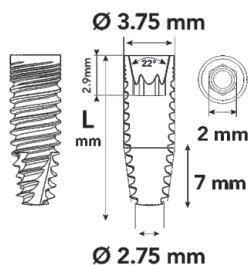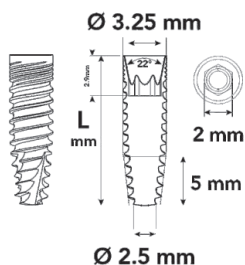

ФОРМИРОВАТЕЛИ ДЕСНЫ

\$23

С ВОГНУТЫМ И ПРЯМЫМ ПРОФИЛЕМ

Формирователи десны устанавливаются на период заживления десны (6–8 недель), с целью получения требуемого профиля прорезывания мягких тканей. Такой вид формирователей может устанавливаться как в стандартной ситуации, так и при протезировании на Locator.

Ø4.5 mm

2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm

2mm 3mm 4mm 5mm 7mm

55-72042 55-72043 55-72044 55-72045 55-72047

Ø4.5 mm

2 mm
3 mm
5 mm

2mm 3mm 5mm

55-72002 55-72003 55-72005

Ø6.0 mm

2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm

2mm 3mm 4mm 5mm 7mm

55-72062 55-72063 55-72064 55-72065 55-72067

Ø3.0 mm Узкий

2 mm

2mm

55-72006

СЛЕПОЧНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
СОВМЕСТИМЫ СО ВСЕЙ ЛИНЕЙКОЙ РСА

Ø4.5 mm

Трансфер для закрытой ложки

Трансфер для открытой ложки

Трансфер для открытой ложки узкий

Трансфер для открытой ложки узкий

\$21

\$24

\$24

\$24

56-72145 56-72045 56-72046 56-72004

Ø6.0 mm

Трансфер для закрытой ложки

Трансфер для открытой ложки

\$22

\$24

56-72160 56-72060

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

Аналог

Скан-абатмент

Аналог для цифровой модели

Трансфер с абатментом для закрытой ложки

\$20

\$55

\$31

\$46

56-72011 30-70105 30-70522 56-72012

Протокол снятия слепков открытой ложки

Протокол снятия слепков закрытой ложки

26 | КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ RALTOP

ТИТАНОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ CAD CAM

\$28

Применяются для изготовления индивидуальных циркониевых абатментов.


ВИНТ В КОМПЛЕКТЕ




\$28

\$28

ТИТАНОВЫЕ ОСНОВАНИЯ СО СКОСОМ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОГО ОТДЕЛА

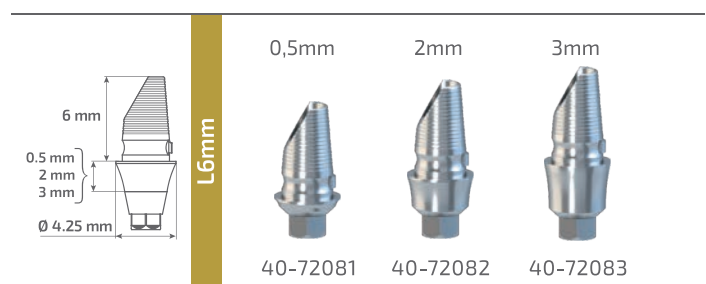

ТИТАНОВЫЕ ОСНОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

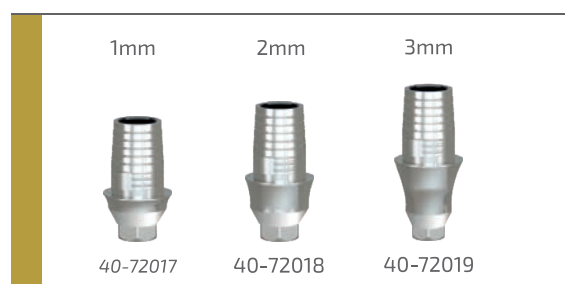

ЦИФРОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ





ТИТАНОВЫЕ ОСНОВАНИЯ С УГЛОВОЙ ШАХТОЙ ВИНТА


\$67

Во фронтальном отделе позволяют изменить положения отверстия шахты абатмента до 20° с вестибулярной стороны на небную.

ВИНТ В КОМПЛЕКТЕ

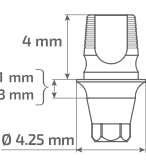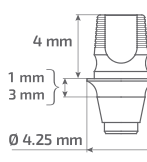
			С шестигранником			
L4 mm			1mm	3mm	1mm	3mm
						
40-72054			40-72056		40-72055	40-72057

Ручная отвертка (угловая шахта)	Отвертка для динамометрического ключа (угловая шахта)	Винт для угловой шахты
		
\$80	\$55	\$30
60-70152	60-70153	80-72001

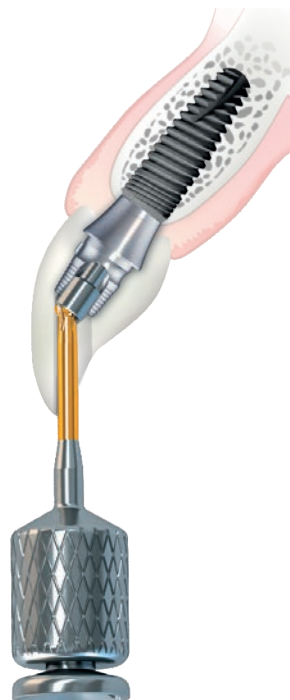

ПРИЛИВАЕМЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АБАТМЕНТЫ С ХРОМОКОБАЛЬТОВЫМ ОСНОВАНИЕМ

\$35

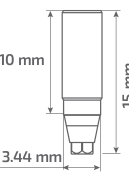		С шестигранником	Без шестигранника
			
		40-72021	40-72022

ВИНТЫ В КОМПЛЕКТЕ С ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ КОМПОНЕНТАМИ

\$12

Система нераскручивающихся винтов. Соединение абатмент-винт имеет стабильное трехточечное соединение, которое не дает винту раскрутиться в процессе эксплуатации конструкции.

Винт абатмента (Multi-Unit)	Винт трансфера для закрытой ложки (Multi-Unit)	Винт трансфера для открытой ложки (Multi-Unit)	Винт трансфера для открытой ложки (для ключа)	Винт трансфера для закрытой ложки	Винт абатмента с коническим соединением	Винт трансфера для открытой ложки (узкий)
						
80-70005	80-70002	80-70028	80-70012	80-70009	80-72002	80-70035

ПРЯМЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ АБАТМЕНТЫ С ВОГНУТЫМ ПРОФИЛЕМ


\$45

Предназначены для протезирования фронтальных и жевательных зубов. Они имеют симметричную и асимметричную (анатомическую) форму, прямую или вогнутую шейку и могут быть индивидуализированы. Контуруступа (плеча) анатомических абатментов воспроизводит естественный рельеф десневого края. Такая форма позволяет достигнуть оптимальных эстетических результатов при минимальных трудозатратах. Идеальный вариант для фронтальных реставраций.

ВИНТ В КОМПЛЕКТЕ

Ø4.5 mm

1mm2mm3mm4mm5mm

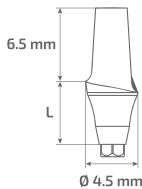




40-7204140-7204240-7204340-7204440-72045

Ø6.0 mm

1mm2mm3mm4mm5mm

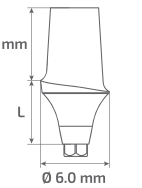




40-7206140-7206240-7206340-7206440-72065

БЕЗ УСТУПА

прямой

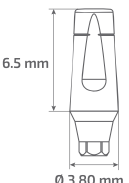



40-72010


УГЛОВЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ АБАТМЕНТЫ С ВОГНУТЫМ ПРОФИЛЕМ

\$45

Компания Paltop Dental Implants предлагает два типа угловых 20° абатментов для расширения возможностей протезирования на имплантатах. При необходимости абатменты могут быть редуцированы.

20°

1mm2mm3mm4mm5mm

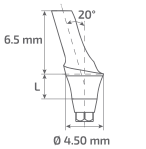




40-7224140-7224240-7224340-7224440-72245

БЕЗ УСТУПА

20°

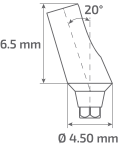



40-72200

ВРЕМЕННЫЕ ТИТАНОВЫЕ АБАТМЕНТЫ

\$42

КОНИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА

С шестигранникомБез шестигранника

0.5mm2mm3mm0.5mm2mm3mm



45-7203145-7203445-7203645-7203245-7203545-72037

ВРЕМЕННЫЙ ТИТАНОВЫЙ АБАТМЕНТ

Временный титановый абатмент позволяет изготавливать коронки прямым методом

\$42



КОНИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА			
Диаметр	Ø4.0	Ø4.0	Ø5.0
Временный абатмент	Титановый		
Cuff	1.5 mm	3.0 mm	3.0 mm
Высота	10.0 mm	10.0 mm	10.0 mm
Артикул	45-72001	45-72003	45-72033

\$42



Отвертка абатмента	Hex Driver
Артикул	60-70244

MULTI-UNIT


Широкий спектр решений для реставраций мостовидных конструкций с винтовой фиксацией на имплантатах.

Компания PALTOP предлагает абатменты системы Multi-Unit с разной степенью ангуляции и разной высоты десны. Абатменты Multi-Unit подходят для всех видов имплантатов.

Угловые абатменты PALTOP системы Multi-Unit - одни из немногих, позволяющие использовать силу закручивания винта на уровне 30 Нсм, что обеспечивает дополнительную стабильность протеза.

ПРЯМЫЕ

\$44

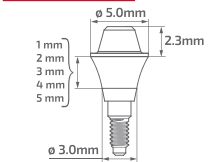

1mm

2mm

3mm

4mm

5mm











42-72041

42-72042


42-72043

42-72044

42-72045

УГЛОВЫЕ 17°

\$70

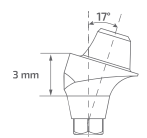

3mm

4,5mm






42-72017

42-72018

УГЛОВОЙ 30°

\$70

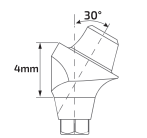


4mm



42-72030

ВИНТ В КОМПЛЕКТЕ

Винт трансфер
открытой
ложки

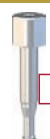

\$12

80-70028

Винт трансфера
для открытой
ложки длинного



\$12

80-70045

Трансфер для
закрытой ложки

5 mm



\$24

56-72003

Трансфер для
открытой ложки



\$24

56-72002

Трансфер
для открытой
ложки длинный



\$24

56-70047

Трансфер с
абатментом для
Multi-Unit

8 mm



\$35

56-70049

Аналог
Multi-Unit



\$18

56-72001

Формирователь
десны
трапецевидный

4,1 mm



\$27

55-72011

Формирователь
десны

4,7 mm



\$27

55-72010

Временный
абатмент Ti,
высота 10 mm



\$41

42-70020

Временный
абатмент Ti,
высота 15mm



\$41

42-70030

выжигаемый
абатмент



\$20

42-70021

Титановое
основание
для Multi-Unit

4,5 mm



\$44

42-70022

Титановое
основание
для циркония

4,5 mm



\$44

42-70028

Скан-
абатмент



\$55

30-70103

Аналог для
цифровой
модели



\$31

30-70523

Винт для
Multi-Unit



\$12

80-70005

Винт трансфера,
абатмента для
закрытой ложки



\$12

80-70002

Винт трансфера,
абатмента для
открытой ложки



\$12

80-70006

Винт
цифрового
аналога



\$12

80-70048

Винт
формирователь




\$12

80-70041

30 | КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ PALTOP

ШАРОВИДНЫЕ АБАТМЕНТЫ

\$45

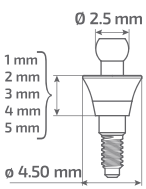

1mm	2mm	3mm	4mm	5mm
				
40-72001	40-72002	40-72003	40-72004	40-72005

Ретенционная матрица Ультра-эластичная 350 гр	Ретенционная матрица Ультра-мягкая 500 гр	Ретенционная матрица Мягкая 900 гр	Ретенционная матрица Стандартная 1300 гр	Металлическая втулка	Аналог шаровидного абатмента
					
40-70131	40-70132	40-70023	40-70065	40-70022	56-70013

АБАТМЕНТЫ LOCATOR

\$120



1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm
					
40-72011	40-72012	40-72013	40-72014	40-72015	40-72016

Набор матриц (угол отклонения до 10°)	Набор матриц (угол отклонения от 10° до 20°)	Слепочный трансфер	Аналог Locator	Ключ для установки/извлечения Locator и матрицы
				
40-70081	40-70112	56-70026	56-70027	60-70133

АБАТМЕНТЫ EQUATOR

\$89

0,5mm	1mm	2mm	3mm	4mm	5mm	6mm
						
40-72066	40-72067	40-72068	40-72069	40-72070	40-72071	40-72072

Матрица Стальная	Матрица Жесткая 2700 гр	Матрица Стандартная 1800 гр	Матрица Мягкая 1200 гр	Матрица Ультра- мягкая 600 гр	Матрица Лабораторная	Колпачок из анодированного металла	Защитный диск жесткий	Защитный диск мягкий
								
40-70287	40-70282	40-70283	40-70284	40-70285	40-70286	40-70305	40-70288	40-70289


Слепочный трансфер	Аналог	Ключ для установки/ извлечения Equator и матрицы
		
56-70042	56-70041	60-70161

НАБОР ПРЯМЫХ МАТРИЦ ДЛЯ ЭКВАТОРА

\$55 NEW



40-70306

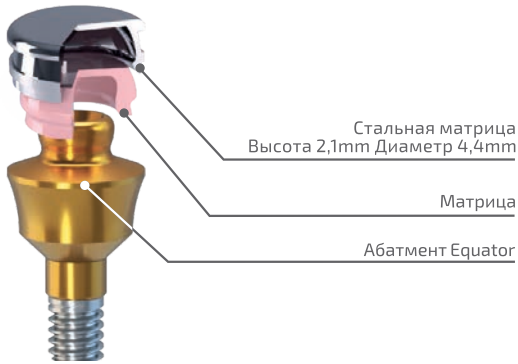


Матрица стальная		40-70287
Матрица лабораторная		40-70286
Матрица жесткая 2700 гр.		40-70282
Матрица стандартная 1800 гр.		40-70283
Матрица мягкая 1200 гр.		40-70284
Матрица ультра-мягкая 600 гр.		40-70285
Защитный диск жесткий		40-70288

НАБОР УГЛОВЫХ МАТРИЦ ДЛЯ ЭКВАТОРА

\$95 NEW




40-70307

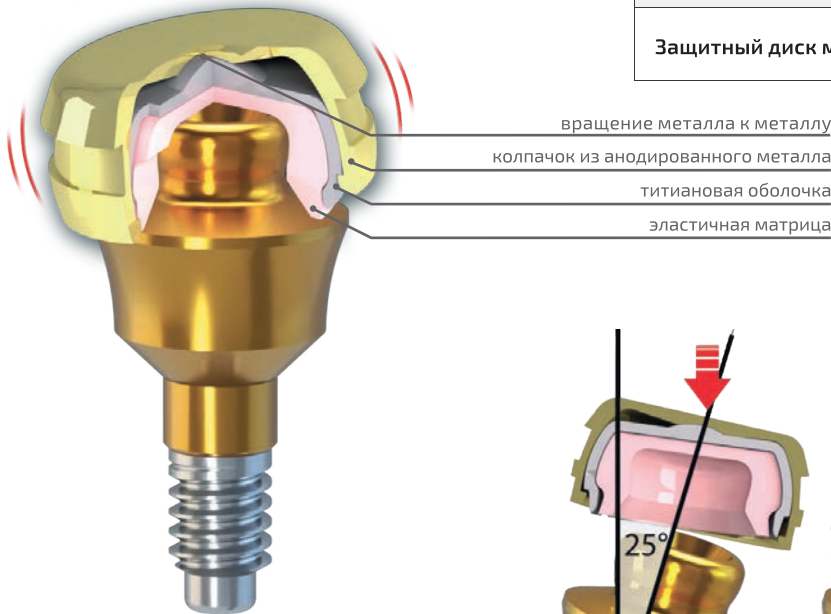

Колпачок из анодированного металла		40-70305
Матрица жесткая 2700 гр.		40-70282
Матрица стандартная 1800 гр.		40-70283
Матрица мягкая 900 гр.		40-70284
Матрица ультра-мягкая 1200 гр.		40-70285
Защитный диск мягкий		40-70289

Smart
BOX

- ✓ Абатмент «экватор», выравнивающий угол наклона
- ✓ Корректная дивергенция до 50° с двух сторон

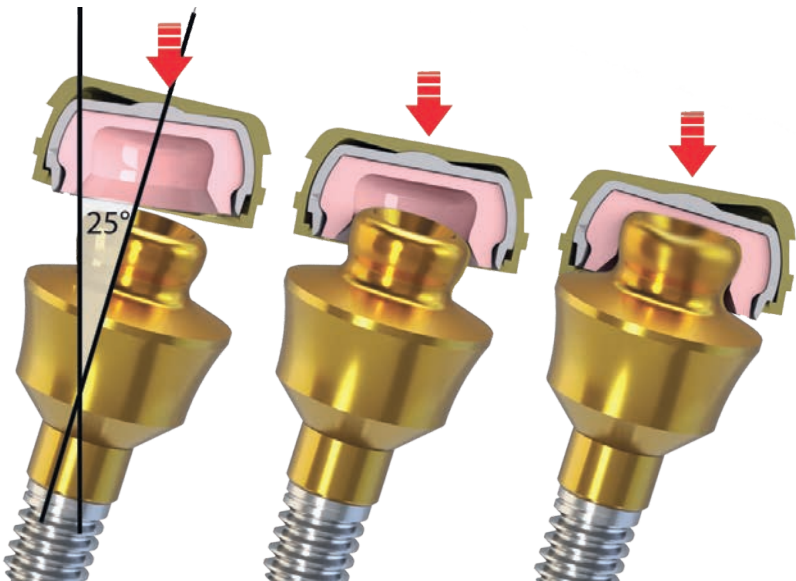

Будущее имплантологии уже здесь вместе с PALTOP!

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ

\$66


NEW

17290016357209

Представляет собой формирователь десны с встроенным электромагнитным чипом, создающим импульсное электромагнитное поле.

- ✓ Способствует регенерации костной и мягкой ткани.
- ✓ Ускоряет остеоинтеграцию, за счет уменьшения первичного воспалительного процесса, как следствие, первичной резорбции.
- ✓ Предотвращает периимплантит.
- ✓ Повышает местный иммунитет.
- ✓ Уменьшает воспалительную реакцию как в кости, так и в мягких тканях.
- ✓ Увеличивает успех имплантации у пациентов с высокими рисками.

Продолжительность непрерывного воздействия после активации 30 дней.

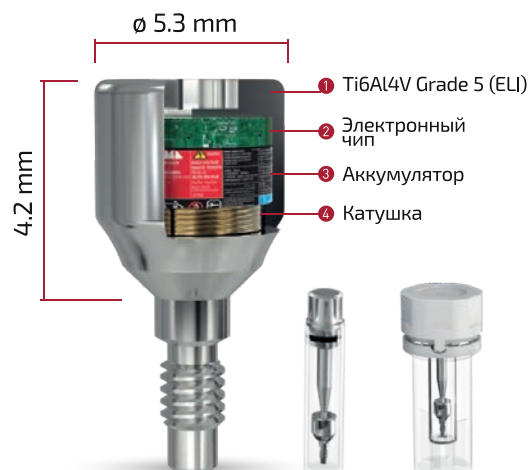

АКТИВАТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ФОРМИРОВАТЕЛЯ

\$266

NEW




07290016357806

Устройство предназначено для активации электромагнитного формирователя.



SURGICAL KITS & TOOLS

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КОМПАНИИ RALTOR DENTAL ЗАВОД
Komet (ГЕРМАНИЯ) РАЗРАБОТАЛ И ИЗГОТОВИЛ
ТЕХНОЛОГИЧНЫЕ И ЭРГОНОМИЧНЫЕ НАБОРЫ.

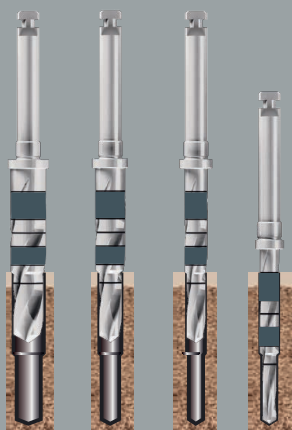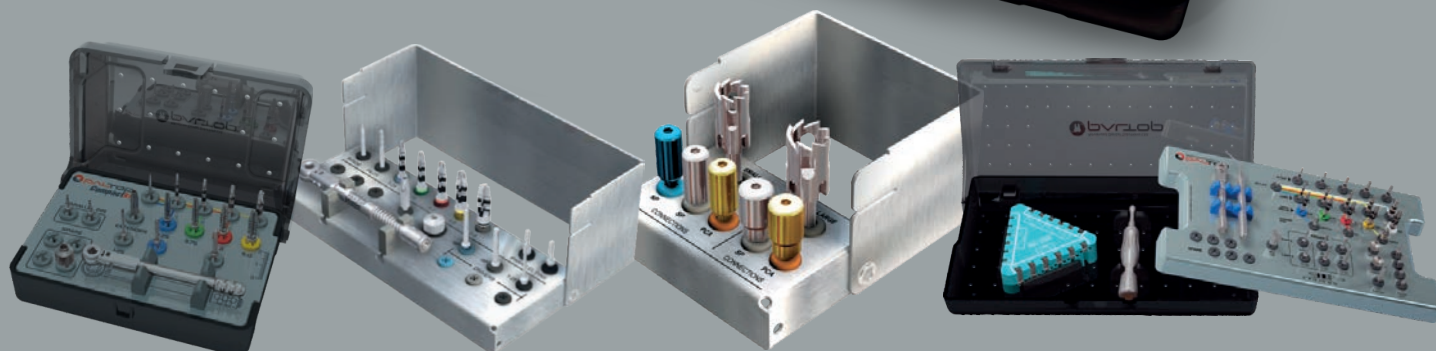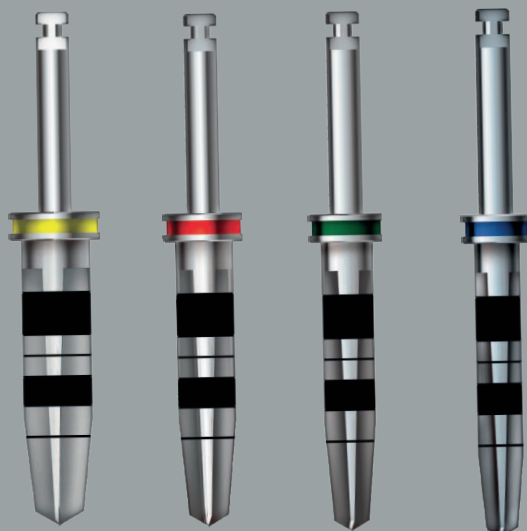

ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ


И ИНСТРУМЕНТАРИЙ
(Komet, ГЕРМАНИЯ)

ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ

Изготавливаются на заводе Komet, Германия.

НАБОР СТОППЕРОВ \$499

Набор ограничителей глубины сверления предназначен для всех размеров имплантатов. Позволяет выполнять сверления безопасно и уверенно, тем самым упрощая процесс остеотомии и экономя время доктора.

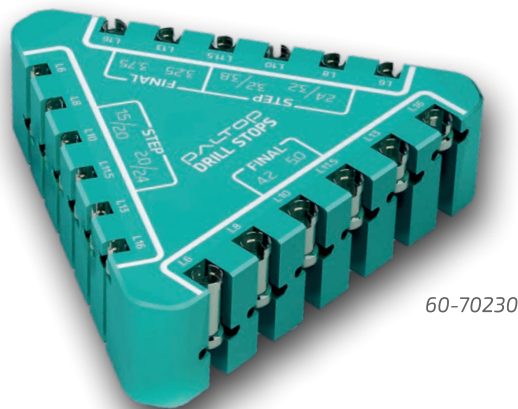

60-70230

СТАНДАРТНЫЙ НАБОР \$1599




60-70110

КОМПАКТНЫЙ НАБОР \$1299



60-70111

КОМПАКТНЫЙ мини-набор \$950

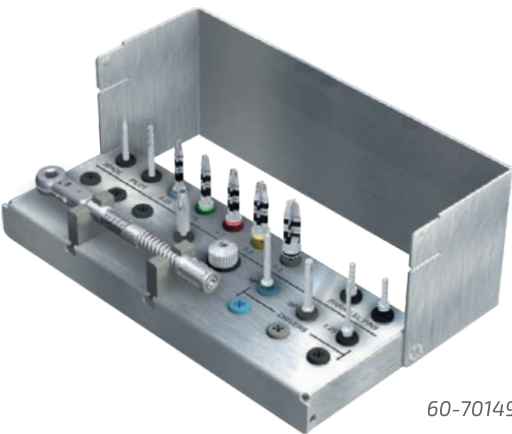

60-70149

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ НАБОР \$560

Набор отверток и ключей для фиксации ортопедических конструкций.

Отвертка короткая Ø1.25 mm L6.5mm		60-70164
Отвертка средняя Ø1.25 mm L9.0mm		60-70102
Отвертка стандартная Ø1.25 mm L15.0mm		60-70101
Отвертка средняя ручная Ø1.25mm L14.0mm		60-70006
Отвертка длинная ручная Ø1.25mm L23.0mm		60-70159
Переходник для ключа трещотки		60-70100
Динамометрический ключ		60-70042




60-70245

МИНИ-НАБОР ОСТЕОТОМОВ

\$219

Набор включает 4 остеотома для всех размеров имплантатов Paltop. Остеотомы предназначены для работы с костной тканью IV типа. Служат для уплотнения костной ткани стенок ложа имплантата.

Остеотом для имплантата Ø 3.25		60-70081
Остеотом для имплантата Ø 3.75		60-70082
Остеотом для имплантата Ø 4.2		60-70083
Остеотом для имплантата Ø 5.0		60-70084

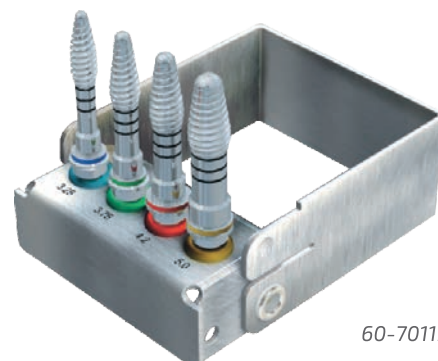



60-70119

НАБОР ПИНОВ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТИ

\$369

Пины параллельности предназначены для проверки параллельности установки имплантатов всех диаметров.

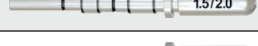Конечный пин 3.25 mm		60-70085	1
Конечный пин 3.75 mm		60-70086	1
Конечный пин 4.2 mm		60-70087	1
Конечный пин 5.0 mm		60-70088	1
Ступенчатый пин 1.5/2.0 mm		60-70134	2
Ступенчатый пин 2.0/2.4 mm		60-70135	2
Ступенчатый пин 2.4/3.2 mm		60-70136	2
Ступенчатый пин 3.2/3.8 mm		60-70137	2

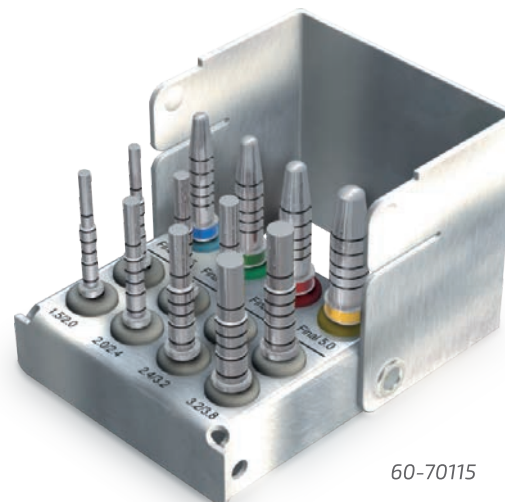

60-70115

НАБОР ПРОФИЛЬНЫХ ФРЕЗ

\$379

Профильные фрезы предназначены для формирования костного профиля вокруг имплантатов.

Фреза 5.0 mm		60-70127
Фреза 6.0 mm		60-70128
Штифт для профильной фрезы Ø 5.0 mm узкая платформа имплантата		60-70129
Штифт для профильной фрезы Ø 5.0 mm стандартная платформа имплантата		60-50130
Штифт для профильной фрезы Ø 5.0 mm коническая платформа имплантата		60-50131
Штифт для профильной фрезы Ø 6.0 mm стандартная платформа имплантата		60-50132
Штифт для профильной фрезы Ø 6.0 mm коническая платформа имплантата		60-50133




60-70116

НАБОР КОРТИКАЛЬНЫХ ФРЕЗ

\$329

Кортикальные фрезы предназначены для уменьшения избыточного давления на кортикальную пластинку при установке имплантата и предотвращения резорбции.

Фреза для имплантатов Ø 3.25 mm и Ø 3.75 mm		60-70145
Фреза для имплантатов Ø 4.2 mm		60-70144
Фреза для имплантатов Ø 5.0 mm и Ø 6.0 mm		60-70143

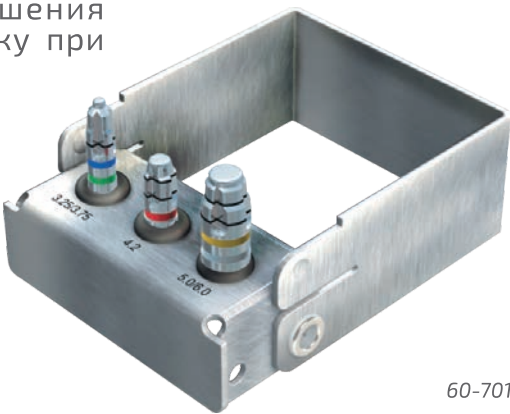

60-70117

НАБОР МЕТЧИКОВ РЕЗЬБЫ

\$179

Для более пассивного размещения имплантатов в плотной кости.

Метчик резьбы для имплантата Ø 3.25 mm		60-70056
Метчик резьбы для имплантата Ø 3.75 mm		60-70057
Метчик резьбы для имплантата Ø 4.2 mm		60-70058
Метчик резьбы для имплантата Ø 5.0 mm		60-70059



60-70118

НАБОР СВЕРЛ ДЛЯ ШИРОКОЙ ПЛАТФОРМЫ Ø 6.0 MM

\$319

Ступенчатое сверло длинное 3.8/4.3		60-70121
Ступенчатое сверло длинное 4.3/5.3		60-70123
Финишное сверло для имплантата Ø 6.0mm		60-70098
Профильная фреза для имплантатов Ø5.0 и Ø6.0 mm		60-70143





60-70114

НАБОР СТУПЕНЧАТЫХ КОРОТКИХ СВЕРЛ


\$379

Предназначен для работ в дистальных отделах.

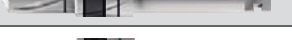
Ступенчатое сверло короткое 1.5/2.0 mm		60-70047
Ступенчатое сверло короткое 2.0/2.4 mm		60-70049
Ступенчатое сверло короткое 2.4/3.2 mm		60-70051
Ступенчатое сверло короткое 3.2/3.8 mm		60-70053

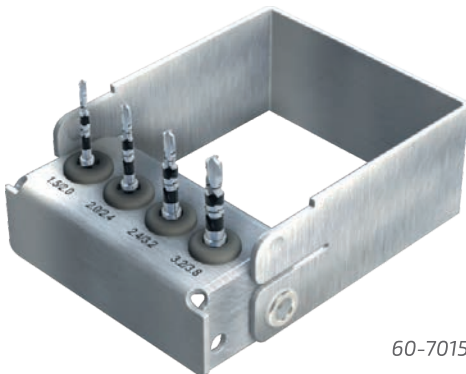

60-70150

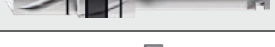Переходник для ключа трещотки		60-70100	\$42
Отвертка универсальная для ключа Ø1.25mm		60-70003	\$50
Отвертка короткая ручная Ø1.25mm L9.0mm		60-70005	\$77
Отвертка средняя ручная Ø1.25mm L14.0mm		60-70006	\$77
Отвертка длинная ручная Ø1.25mm L23.0mm		60-70159	\$77
Пин параллельности 1.5/2.0 mm		60-70015	\$27
Удлинитель сверла с подачей воды		60-70019	\$53
Пилотное сверло		60-70020	\$35
Ступенчатое сверло короткое 1.5/2.0 mm		60-70047	\$72
Ступенчатое сверло короткое 2.0/2.4 mm		60-70049	\$72
Ступенчатое сверло короткое 2.4/3.2 mm		60-70051	\$72
Ступенчатое сверло короткое 3.2/3.8 mm		60-70053	\$72
Ступенчатое сверло короткое 3.8/4.3 mm		60-70120	\$72
Ступенчатое сверло длинное 1.5/2.0 mm		60-70048	\$72
Ступенчатое сверло длинное 2.0/2.4 mm		60-70050	\$72
Ступенчатое сверло длинное 2.4/3.2 mm		60-70052	\$72
Ступенчатое сверло длинное 3.2/3.8 mm		60-70054	\$72
Ступенчатое сверло длинное 3.8/4.3 mm		60-70121	\$72
Ступенчатое сверло длинное 4.3/5.3 mm		60-70123	\$72
Финишное сверло для имплантата Ø 3.0 mm		60-70147	\$72
Финишное сверло для имплантата Ø 3.25 mm		60-70035	\$72
Финишное сверло для имплантата Ø 3.75 mm		60-70037	\$72
Финишное сверло для имплантата Ø 4.2 mm		60-70039	\$72
Финишное сверло для имплантата Ø 5.0 mm		60-70041	\$72
Финишное сверло для имплантата Ø 6.0 mm		60-70098	\$72
Финишное сверло короткое для имплантата Ø 3.0 mm		60-70168	\$72
Финишное сверло короткое для имплантата Ø 3.25 mm		60-70034	\$72
Финишное сверло короткое для имплантата Ø 3.75 mm		60-70036	\$72
Финишное сверло короткое для имплантата Ø 4.2 mm		60-70038	\$72
Финишное сверло короткое для имплантата Ø 5.0 mm		60-70040	\$72
Финишное сверло короткое для имплантата Ø 6.0 mm		60-70167	\$72

ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАБОРЫ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

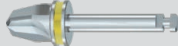Имплантовод длинный, Ø2.5 mm (Станд.платформа) L=15 mm		60-70103	\$42
Имплантовод короткий, Ø2.5 mm (Станд.платформа) L=9 mm		60-70104	\$42
Имплантовод длинный, Ø2.0 mm (Узкая платформа) L=15 mm		60-70105	\$42
Имплантовод короткий, Ø2.0 mm (Узкая платформа) L=9 mm		60-70106	\$42
Ключ-трещотка		60-70013	\$250
Ручной наконечник		60-70014	\$215
Глубиномер		60-70073	\$44
Профильная фреза для имплантатов Ø5.0 и Ø6.0 mm		60-70143	\$99
Финишное сверло Ø 5.0 mm для имплантата 6.0mm		60-70078	\$72
Финишное сверло Ø 4.2 mm для имплантата 6.0mm		60-70077	\$72
Имплантовод 2.0 mm для ключа узкая платформа		60-70012	\$77
Имплантовод 2.5 mm для ключа стандартная платформа		60-70009	\$77
Динамометрический ключ		60-70042	\$264
Динамометрический ключ		60-70079	\$250
Отвертка короткая Ø1.25 mm L6.5mm		60-70164	\$42
Отвертка средняя Ø1.25 mm L9.0mm		60-70102	\$42
Отвертка стандартная Ø1.25 mm L15.0mm		60-70101	\$42
Отвертка длинная Ø1.25 mm L23.0mm		60-70165	\$42

Остеотом	Ø2.2-2.7mm		60-70090	\$140
Остеотом	Ø2.7-3.2mm		60-70091	\$140
Остеотом	Ø3.2-3.7 mm		60-70092	\$140

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ОТВЕРТКА ПРЕМИУМ КЛАССА

\$579 **NEW**

MTD30902

Для более быстрого и удобного откручивания и закручивания ортопедических компонентов. С регулировкой торка от 10-50 н/см и оборотов от 10-50 об/мин. Головка вращается на 360 градусов.



НАБОР ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА АБАТМЕНТА

\$130 **NEW**

AUSC0001

Набор, предназначен для точного определения угла наклона имплантата в полости рта или на модели в лаборатории. Это упрощает выбор правильного угла абатмента. Совместим с имплантатами длиной от 6-16 мм.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ОТВЕРТКА

\$65 **NEW**


TSD15001

Отвертка с крутящим моментом 15Нсм для работы с любыми ортопедическими компонентами в зуботехнической лаборатории.



Компания Paltop Dental Implants предлагает широкий спектр передовых цифровых решений для клиник и лабораторий в сфере хирургического планирования и дентальной имплантации.

Наши продукты и услуги превращают имплантацию и дентальную реставрацию в единый непрерывный процесс на базе цифровых технологий - современных, точных, безопасных и эффективных.

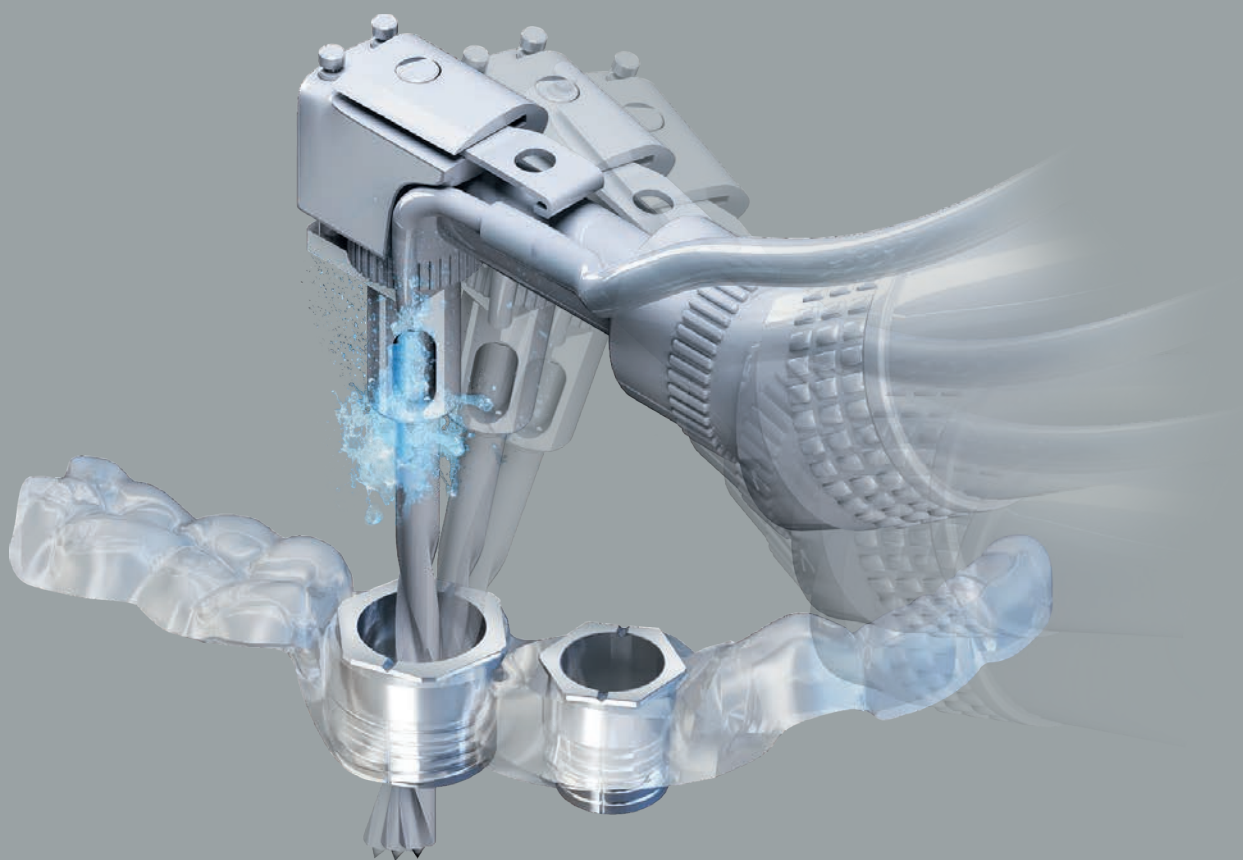

ЦИФРОВЫЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

БИБЛИОТЕКИ NT-TRADING PALTOP:

zshape 

exocad
DIGITAL LIBRARY

exocad
MODEL CREATOR

СОВМЕСТИМЫ С ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ КОМПАНИЙ:

zshape 

PLANMECA

Blue Sky Plan


AMANN GIRRBACH


exocad

 **dental wings**

Zirkonzahn

ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР ДЛЯ ПОЛНОГО ПРОТОКОЛА

\$2999

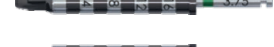
Узкая втулка DGS		30-70616	1	Имплантовод длинный для узкой и Конических платформ		30-70642	1
Широкая втулка DGS		30-70600	1	Имплантовод узко-короткий для Стандартной платформы		30-70622	1
Мукотом узкий Ø4mm		60-70140	1	Имплантовод узко-средний для Стандартной платформы		30-70632	1
Мукотом широкий Ø5mm		60-70141	1	Имплантовод узко-длинный для Стандартной платформы		30-70602	1
Короткое пилотное сверло Ø2 mm		30-70305	1	Имплантовод широко-короткий для Узкой и Конических платформ		30-70643	1
Адаптер имплантовода для углового наконечника		30-70618	1	Имплантовод широко-средний для Узкой и Конических платформ		30-70644	1
Отвертка Ø 1.25 mm L14 mm		60-70006	1	Имплантовод широко-длинный для Узкой и Конических платформ		30-70645	1
Фиксирующие костные пины		30-70505	4	Имплантовод широко-короткий для Стандартной платформы		30-70624	1
Сверло Ø2mm L20mm		30-70306	1	Имплантовод широко-средний для Стандартной платформы		30-70634	1
Сверло Ø3.25mm L20mm		30-70307	1	Имплантовод широко-длинный для Стандартной платформы		30-70604	1
Сверло Ø3.7mm L20mm		30-70308	1	Пилотное сверло Ø2mm L20 mm		30-70333	1
Сверло Ø4.2mm L20mm		30-70309	1	Динамометрический ключ		60-70079	1
Сверло Ø5mm L20mm		30-70310	1	Угловой наконечник		30-70324	1
Сверло Ø2mm L25mm		30-70312	1	Уникальная навигационная муфта <i>Digital Guidance Sleeve (DGS)</i> от <i>PALTOP</i> направляет сверло с помощью наконечника, через хирургический шаблон, для точного и аккуратного позиционирования сверла. Специально разработанные хирургические сверла для имплантации по шаблону позволяют с высокой точностью, последовательно формировать остеотомическое отверстие в соответствии с цифровым планированием.			
Сверло Ø3.25mm L25mm		30-70313	1				
Сверло Ø3.75mm L25mm		30-70314	1				
Сверло Ø4.2mm L25mm		30-70315	1				
Сверло Ø5mm L25mm		30-70316	1				
Сверло Ø2mm L30mm		30-70318	1				
Сверло Ø3.25mm L30mm		30-70319	1				
Сверло Ø3.75mm L30mm		30-70320	1				
Сверло Ø4.2mm L30mm		30-70321	1				
Сверло Ø5mm L30mm		30-70322	1				
Развальцовочный бор для кортикальной кости Ø3.25mm		30-70325	1	Под заказ 			
Развальцовочный бор для кортикальной кости Ø3.75mm		30-70326	1				
Развальцовочный бор для кортикальной кости Ø4.2mm		30-70327	1				
Развальцовочный бор для кортикальной кости Ø5mm		30-70328	1				
Имплантовод узко-короткий для Узкой и Конических платформ		30-70640	1				
Имплантовод средний для Узкой и Конических платформ		30-70641	1				

НАБОР ПИЛОТНЫХ СВЕРЛ ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ШАБЛОНА

\$319

Набор свёрл полностью совместим с хирургическим набором полного протокола.

Пилотное сверло		30-70301
Сверло 20 мм		30-70329
Сверло 25 мм		30-70332
Сверло 30 мм		30-70331

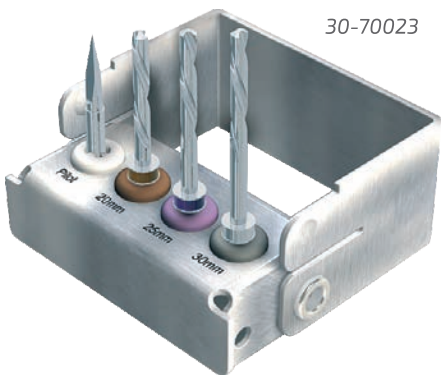

30-70023

ВТУЛКИ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО СВЕРЛЕНИЯ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВТУЛКИ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО СВЕРЛЕНИЯ L=5mm			
Ø2mm	Бронзовая глубина сверления 20mm	Фиолетовая глубина сверления 25mm	Серая глубина сверления 30mm
			
	\$10	\$10	\$10
	30-70405	30-70403	30-70401

С ОПОРОЙ НА ЗУБЫ



МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ВТУЛКИ ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО СВЕРЛЕНИЯ L=10mm			
удлиненная Ø2mm	Бронзовая 20mm	Фиолетовая 25mm	Серая 30mm
			
	\$10	\$10	\$10
	30-70406	30-70404	30-70402

ШТИФТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ШАБЛОНОВ	ШТИФТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ШАБЛОНОВ	ГИЛЬЗА ДЛЯ ФИКСАЦИИ ШТИФТА В ШАБЛОНЕ
		
25mm \$20 30-70505	20mm \$20 30-70516	\$12 30-70407

ГИЛЬЗЫ ДЛЯ ПОЛНОГО ПРОТОКОЛА

\$10

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГИЛЬЗЫ ДЛЯ ШАБЛОНОВ ПОЛНОГО ПРОТОКОЛА						
узкие Ø4mm	Бронзовая глубина сверления 20 мм	Фиолетовая глубина сверления 25 мм	Серая глубина сверления 30 мм	широкие Ø5mm	Бронзовая глубина сверления 20 мм	Фиолетовая глубина сверления 25 мм
						
	30-70415	30-70414	30-70409		30-70413	30-70412
						30-70408

С ОПОРОЙ НА КОСТЬ



ДЛЯ ШЕСТИГРАННОГО СОЕДИНЕНИЯ

NT TRADING
FOR PALTOP

NT digital
implant
technology

AMANN GIRBACH
FOR PALTOP

 AMANN GIRRBACH

УЗКАЯ ПЛАТФОРМА

Скан-Абатмент	Премил для Абатмента	Аналог для Цифровой модели	Лабораторный Аналог
---------------	----------------------	----------------------------	---------------------

 \$69

 \$55

 \$55

 \$27

30-70108

30-70235

30-70510

30-70239

УЗКАЯ ПЛАТФОРМА

Бланк-абатмент

 \$40

30-70222

СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА

Скан-Абатмент	Заготовка для Абатмента	Аналог для Цифровой модели	Лабораторный Аналог
---------------	-------------------------	----------------------------	---------------------

 \$69

 \$55

 \$55

 \$27

30-70107

30-70234

30-70509

30-70238

СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА

Бланк-абатмент

 \$40

30-70221

ШИРОКАЯ ПЛАТФОРМА

Скан-Абатмент	Заготовка для Абатмента	Аналог для Цифровой модели	Лабораторный Аналог
---------------	-------------------------	----------------------------	---------------------

 \$69

 \$55

 \$55

 \$27

30-70109

30-70236

30-70511

30-70240

ШИРОКАЯ ПЛАТФОРМА

Бланк-абатмент

 \$40

30-70228

ДЛЯ КОНИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

NT TRADING
FOR PALTOP

NT digital
implant
technology

AMANN GIRBACH
FOR PALTOP

 AMANN GIRRBACH

КОНИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА

Скан-Абатмент	Заготовка для Абатмента	Аналог для Цифровой модели	Лабораторный Аналог
---------------	-------------------------	----------------------------	---------------------

 \$69

 \$55

 \$55

 \$27

30-70110

30-70237

30-70512

30-70241

Бланк абатмент

 \$40

30-70223




ПРОТОКОЛЫ ОСТЕОТОМИИ



ADVANCED CLASSIC



Кость D1-D2

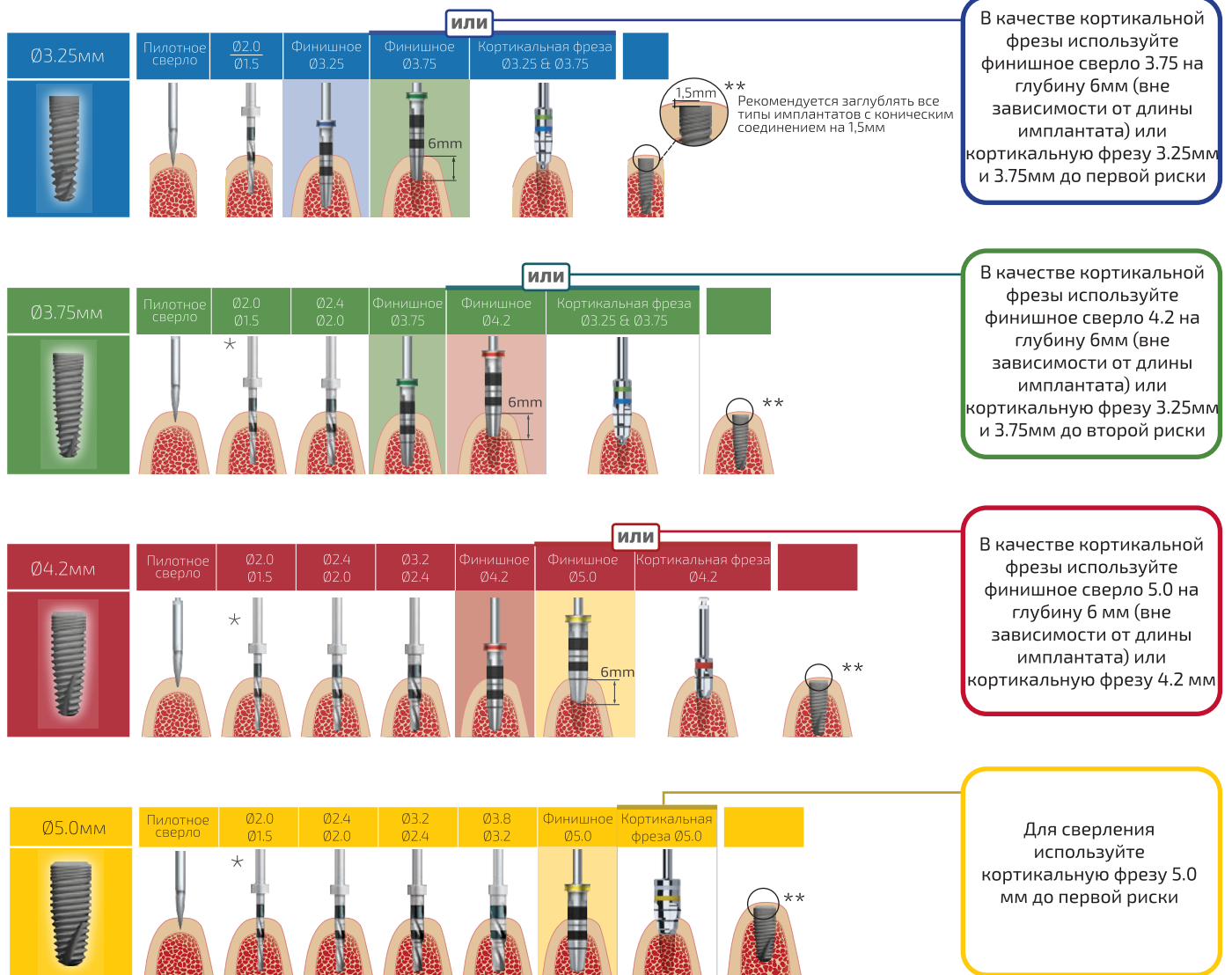

Рекомендуемый торк установки имплантата составляет 30 - 50 Нсм.

* Опционально: последовательность сверления может начинаться со сверла Ø 2.0/ Ø2.4


**Рекомендуется заглублять все типы имплантатов с коническим соединением на 1,5 мм.

Примечание: протокол остеотомии должен выбираться исходя из индивидуальных особенностей и состояния пациента.

ADVANCED CLASSIC



Кость D3-D4

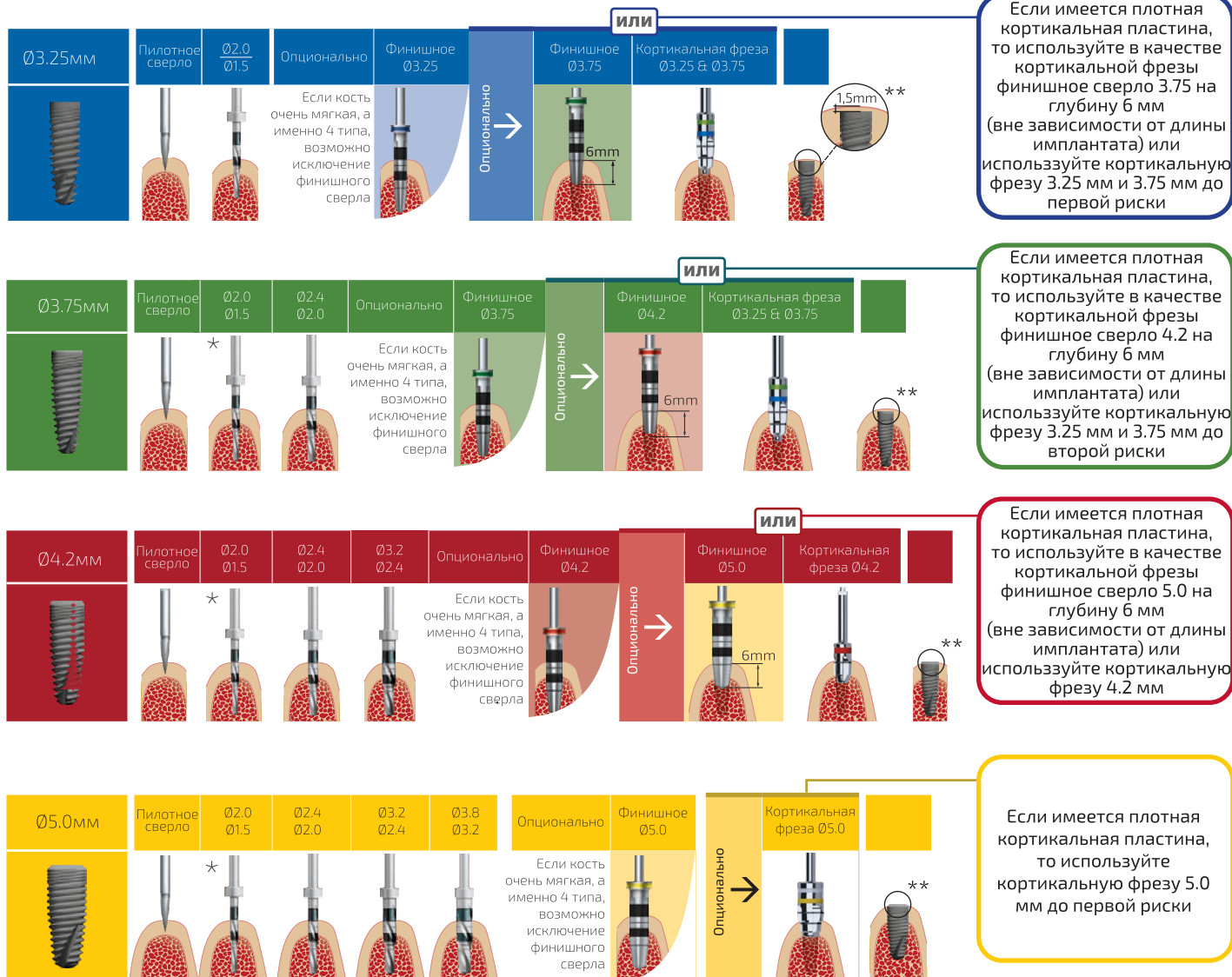






Рекомендуемый торк установки имплантата составляет 30 - 50 Нсм.

* Опционально: последовательность сверления может начинаться со сверла Ø 2.0/ Ø2.4

**Рекомендуется заглублять все типы имплантатов с коническим соединением на 1,5 мм.

Примечание: протокол остеотомии должен выбираться исходя из индивидуальных особенностей и состояния пациента.

Кость D1

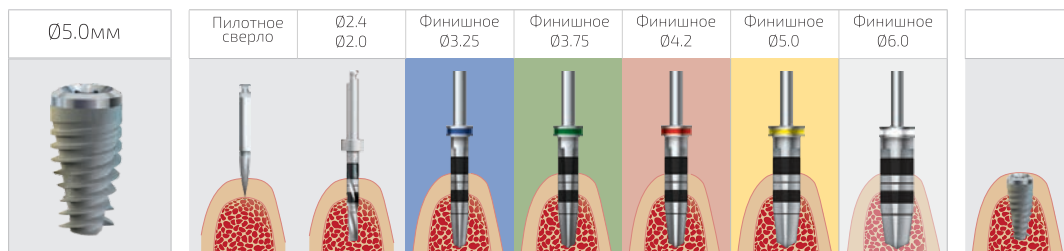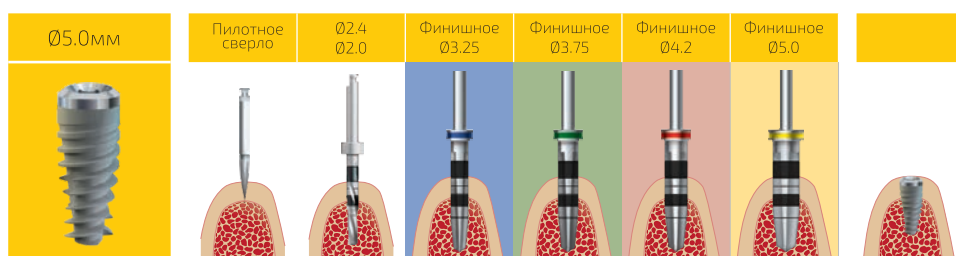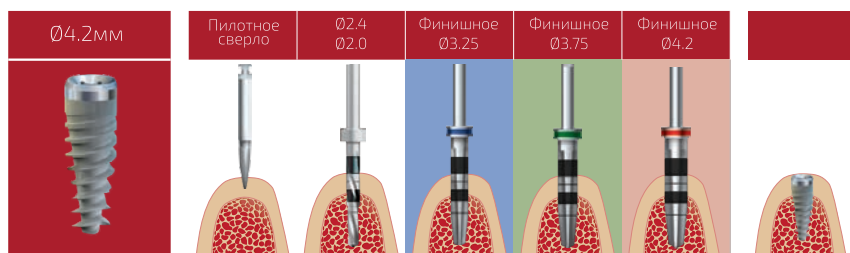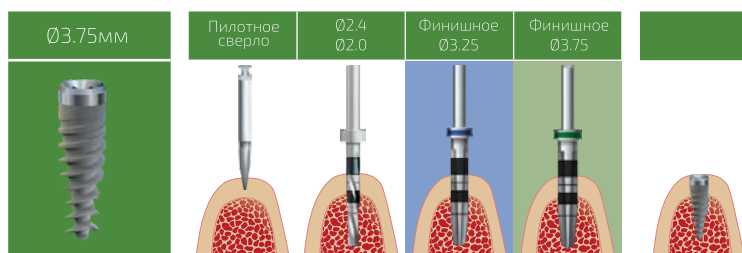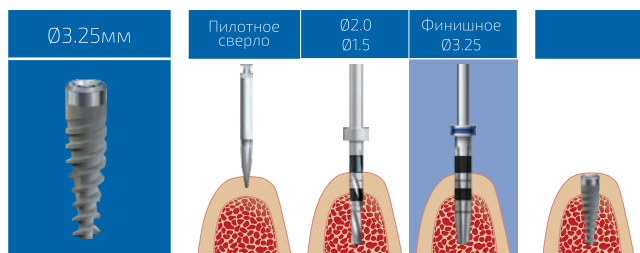

Рекомендуемый торк установки имплантата составляет 30 - 50 Нсм.

* Опционально: последовательность сверления может начинаться со сверла Ø 2.0/ Ø2.4

**Рекомендуется заглублять все типы имплантатов с коническим соединением на 1,5 мм.

Примечание: протокол остеотомии должен выбираться исходя из индивидуальных особенностей и состояния пациента.



Кость D2-D4

Ø3.25мм	Пилотное сверло	Ø2.0 Ø1.5	

Ø3.75мм	Пилотное сверло	Ø2.4 Ø2.0	Финишное Ø3.25	

Ø4.2мм	Пилотное сверло	Ø2.4 Ø2.0	Финишное Ø3.25	Финишное Ø3.75	

Ø5.0мм	Пилотное сверло	Ø2.4 Ø2.0	Финишное Ø3.25	Финишное Ø3.75	Финишное Ø4.2	


Ø5.0мм	Пилотное сверло	Ø2.4 Ø2.0	Финишное Ø3.25	Финишное Ø3.75	Финишное Ø4.2	Финишное .0	

Рекомендуемый торк установки имплантата составляет 30 - 50 Нсм.

Примечание: протокол остеотомии должен выбираться исходя из индивидуальных особенностей и состояния пациента.



Кость D1-D2

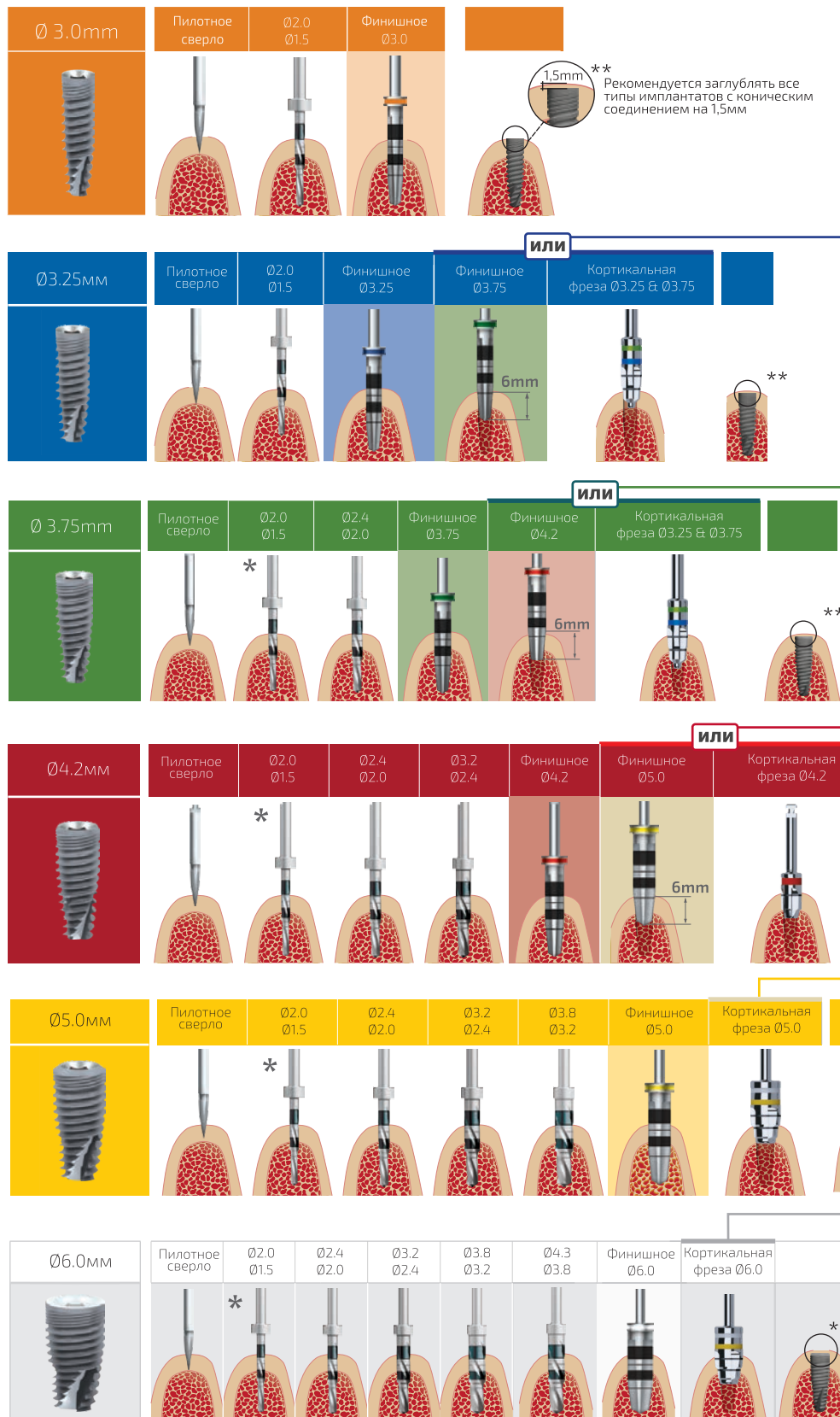

В качестве кортикальной фрезы используйте финишное сверло 3,75 на глубину 6мм (вне зависимости от длин имплантата) или кортикальную фрезу 3,25мм и 3,75мм до первой риски

В качестве кортикальной фрезы используйте финишное сверло 4,2 на глубину 6мм (вне зависимости от длины имплантата) или кортикальную фрезу 3,25мм и 3,75мм до второй риски

В качестве кортикальной фрезы используйте финишное сверло 5,0 на глубину 6мм (вне зависимости от длины имплантата) или кортикальную фрезу 4,2мм

Для остеотомии используйте кортикальную фрезу 5,0мм до первой риски

Для остеотомии используйте кортикальную фрезу 6,0мм до второй риски

Рекомендуемый торк установки имплантата составляет 30 - 50 Нсм.

* Опционально: последовательность сверления может начинаться со сверла Ø 2.0/ Ø2.4

**Рекомендуется заглублять все типы имплантатов с коническим соединением на 1,5 мм.

Примечание: протокол остеотомии должен выбираться исходя из индивидуальных особенностей и состояния пациента.

Кость D3-D4

Ø 3.0mm	Пилотное сверло	Ø2.0 Ø1.5	Финишное Ø3.0	
Рекомендуется заглублять все типы имплантатов с коническим соединением на 1,5мм **				
Ø3.25mm	Пилотное сверло	Ø2.0 Ø1.5	Финишное Ø3.75	Кортикальная фреза Ø3.25 & Ø3.75
ИЛИ Кортикальная фреза Ø3.25 & Ø3.75				
Ø3.75mm	Пилотное сверло	Ø2.0 Ø1.5	Ø2.4 Ø2.0	Финишное Ø4.2
ИЛИ Кортикальная фреза Ø3.25 & Ø3.75				
Ø4.2mm	Пилотное сверло	Ø2.0 Ø1.5	Ø2.4 Ø2.0	Ø3.2 Ø2.4
ИЛИ Финишное Ø5.0				
Ø5.0mm	Пилотное сверло	Ø2.0 Ø1.5	Ø2.4 Ø2.0	Ø3.2 Ø2.4
ИЛИ Кортикальная фреза Ø5.0				
Ø6.0mm	Пилотное сверло	Ø2.0 Ø1.5	Ø2.4 Ø2.0	Ø3.2 Ø2.4

В качестве кортикальной фрезы используйте финишное сверло 3,75 на глубину 6мм (вне зависимости от длин имплантата) или кортикальную фрезу 3,25мм и 3,75мм до первой риски

В качестве кортикальной фрезы используйте финишное сверло 4,2 на глубину 6мм (вне зависимости от длины имплантата) или кортикальную фрезу 3,25мм и 3,75мм до второй риски

В качестве кортикальной фрезы используйте финишное сверло 5,0 на глубину 6мм (вне зависимости от длины имплантата) или кортикальную фрезу 4,2мм

Для остеотомии используйте кортикальную фрезу 5,0мм до первой риски

Рекомендуемый торк установки имплантата составляет 30 - 50 Нсм.

* Опционально: последовательность сверления может начинаться со сверла Ø 2.0/ Ø2.4

Примечание: протокол остеотомии должен выбираться исходя из индивидуальных особенностей и состояния пациента.



Кость D1-D2

Ø 3.0mm	Пилотное сверло	Ø2.0 Ø1.5	Финишное Ø3.0	
				 1.5mm ** Рекомендуется заглублять все типы имплантатов с коническим соединением на 1,5мм

Ø3.25mm	Пилотное сверло	Ø2.0 Ø1.5	Финишное Ø3.25	Финишное Ø3.75	Кортикальная фреза Ø3.25 & Ø3.75	
						 6mm ** В качестве кортикальной фрезы используйте финишное сверло 3,75 на глубину 6мм (вне зависимости от длин имплантата) или кортикальную фрезу 3,25мм и 3,75мм до первой риски

Ø 3.75mm	Пилотное сверло	Ø2.0 Ø1.5	Ø2.4 Ø2.0	Финишное Ø3.75	Финишное Ø4.2	Кортикальная фреза Ø3.25 & Ø3.75	
							 6mm ** В качестве кортикальной фрезы используйте финишное сверло 4,2 на глубину 6мм (вне зависимости от длины имплантата) или кортикальную фрезу 3,25мм и 3,75мм до второй риски

Ø4.2mm	Пилотное сверло	Ø2.0 Ø1.5	Ø2.4 Ø2.0	Ø3.2 Ø2.4	Финишное Ø4.2	Финишное Ø5.0	Кортикальная фреза Ø4.2	
								 6mm ** В качестве кортикальной фрезы используйте финишное сверло 5,0 на глубину 6мм (вне зависимости от длины имплантата) или кортикальную фрезу 4,2мм

Ø5.0mm	Пилотное сверло	Ø2.0 Ø1.5	Ø2.4 Ø2.0	Ø3.2 Ø2.4	Ø3.8 Ø3.2	Финишное Ø5.0	Кортикальная фреза Ø5.0	
								 6mm ** Для остеотомии используйте кортикальную фрезу 5,0мм до первой риски

Ø6.0mm	Пилотное сверло	Ø2.0 Ø1.5	Ø2.4 Ø2.0	Ø3.2 Ø2.4	Ø3.8 Ø3.2	Ø4.3 Ø3.8	Финишное Ø6.0	Кортикальная фреза Ø6.0	
									 6mm ** Для остеотомии используйте кортикальную фрезу 6,0мм до второй риски

Рекомендуемый торк установки имплантата составляет 30 - 50 Нсм.


* Опционально: последовательность сверления может начинаться со сверла Ø 2.0/ Ø2.4

**Рекомендуется заглублять все типы имплантатов с коническим соединением на 1,5 мм.

Примечание: протокол остеотомии должен выбираться исходя из индивидуальных особенностей и состояния пациента.



Кость D3-D4

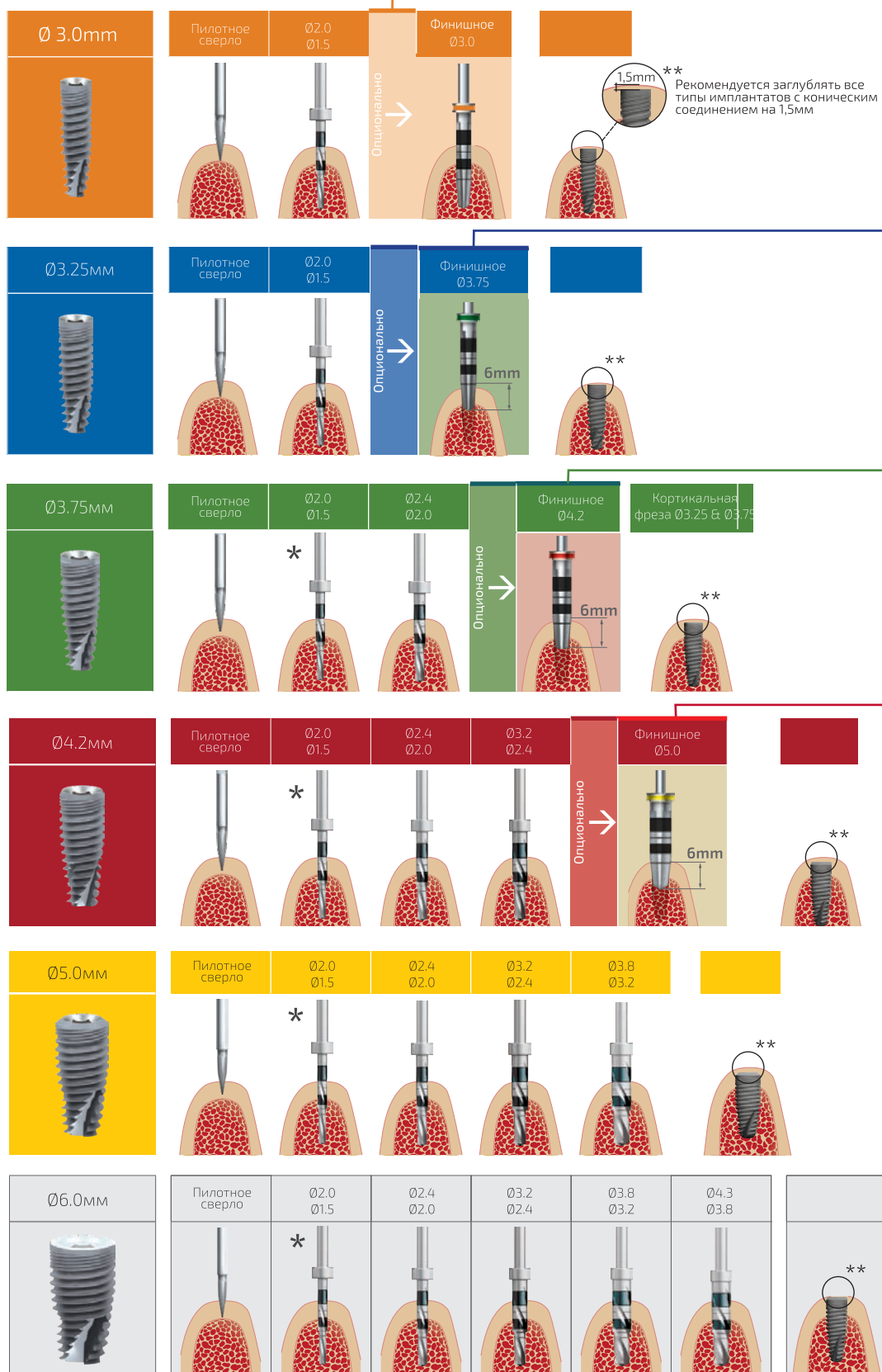

В качестве кортикальной фрезы используйте финишное сверло 3,0 на глубину 6мм (вне зависимости от длин имплантата)

В качестве кортикальной фрезы используйте финишное сверло 3,75 на глубину 6мм (вне зависимости от длин имплантата)

В качестве кортикальной фрезы используйте финишное сверло 4,2 на глубину 6мм (вне зависимости от длины имплантата)

В качестве кортикальной фрезы используйте финишное сверло 5,0 на глубину 6мм (вне зависимости от длины имплантата)

Рекомендуемый торк установки имплантата составляет 30 - 50 Нсм.

* Опционально: последовательность сверления может начинаться со сверла Ø 2.0/ Ø2.4

**Рекомендуется заглублять все типы имплантатов с коническим соединением на 1,5 мм.

Примечание: протокол остеотомии должен выбираться исходя из индивидуальных особенностей и состояния пациента.

Условия распространения:

Имплантаты: пожизненная гарантия. Компания Paltop Dental Implants гарантирует бесплатную замену имплантатов.

Абатмент, который устанавливался на имплантате: гарантия 10 лет. Бесплатный обмен абатмента, предназначенного для установки на имплантате на постоянной основе, с механическим дефектом, на эквивалентный (исключая аттачменты для съемных протезов, которые подвержены естественному износу).



Guarantee



Russia Certificate




CE approval



FDA Certificate



ISO 13485/9001

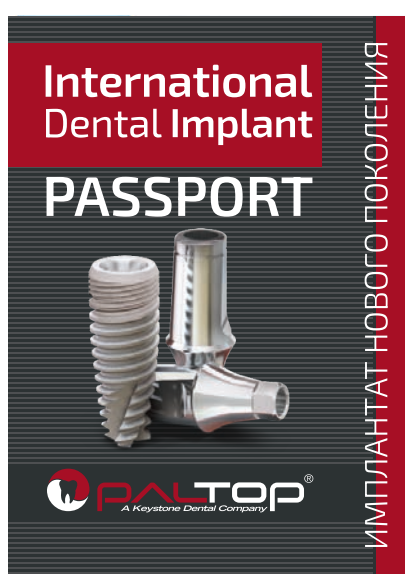

PASSPORT

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ НА ВСЮ ЖИЗНЬ!



IVORY Graft

- Аугментация вертикальная и горизонтальная
- Операция синус-лифтинг
- Лечение периимплантитов
- При пародонтальных операциях
- Заполнение костных дефектов вокруг имплантата
- Возможно использовать без аутокости

**НОВЕЙШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ
В МИРЕ КОСТНЫХ ПЛАСТИК!**

IVORY DENTIM GRAFT™


**ПЕРВЫЙ ОРГАНИЧЕСКИЙ ТРАНСПЛАНТАТ
ИЗ ДЕНТИНА СВИНЫХ ЗУБОВ ПОЛНОСТЬЮ
ИДЕНТИЧНЫЙ СОБСТВЕННОЙ КОСТИ.**

IVORY – это костный графт из дентина зубов с сохраненными органическими компонентами (коллаген и BMPs (морфогенетический протеин кости)).

Технология изготовления IVORY позволила сохранить свойства:

1. Остеокондукции – создание каркаса
2. Остеоиндукции – стимуляция роста костной ткани
3. Остеогенеза – формирование новой кости

Образуется качественная минерализованная кость;
Со временем нерезорбируется;
Сокращает время восстановления кости.

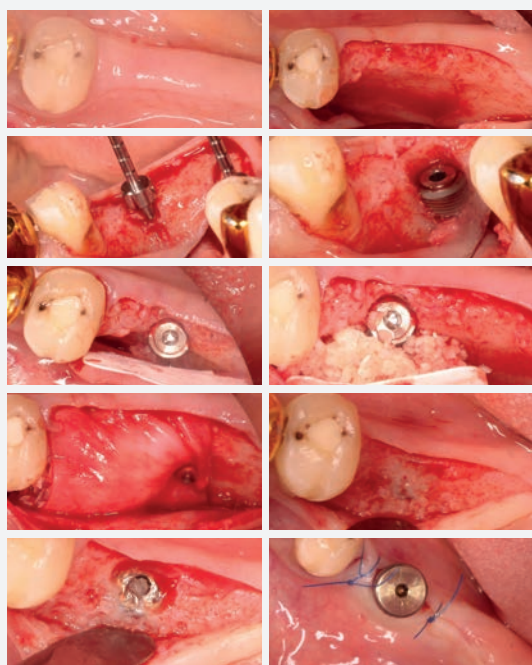

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАШЕЙ КЛИНИКИ

Микроскопы:



Физиодиспенсеры :



Сканеры:



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ШКОЛЫ СТОМАТОЛОГИИ ДОКТОРА ПЕВЗНЕРА



**ШКОЛА СТОМАТОЛОГИИ
ДОКТОРА ПЕВЗНЕРА**


ЗВОНИТЕ! ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ!

+7 (918) 438-23-61

ЗНАНИЯ БЕЗ ГРАНИЦ У ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ МИРА!



WWW.IDGS.RU

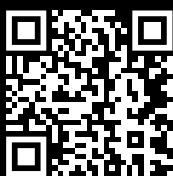

[VK- INTDENTALSCHOOL](https://vk.com/intdentalschool)



[@DENTAL_SCHOOL](https://www.instagram.com/dental_school)

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА НАШИХ МЕРОПРИЯТИЯХ!


КОМПАНИЯ DENTAL OFFICE 12

МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ



В НАШЕМ ПРИЛОЖЕНИИ:

- ВОЗМОЖНОСТИ
- РАЗВИТИЕ
- НОВОСТИ

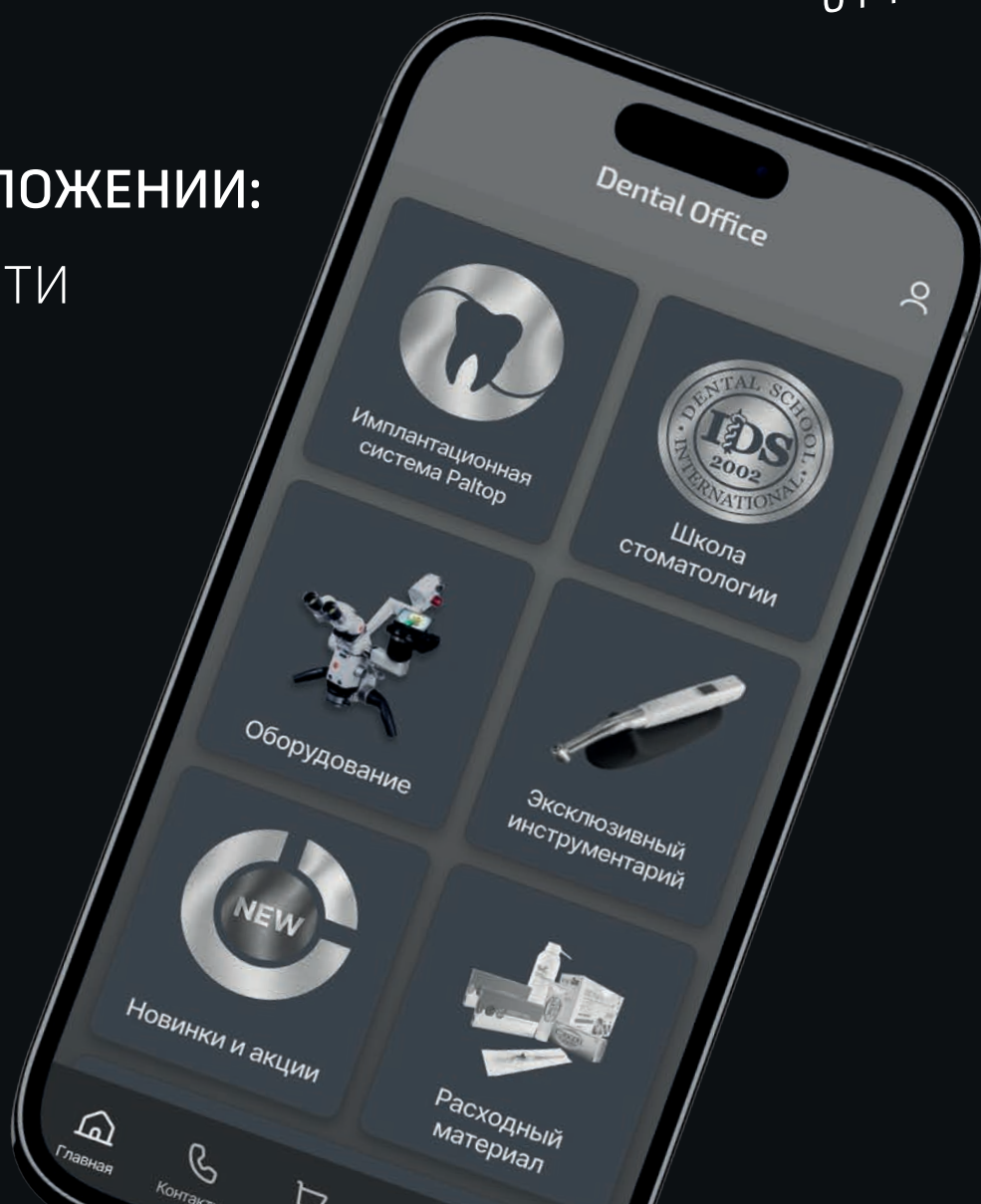

У НАС ВЫ НАЙДЕТЕ ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО

+7(918)977-12-12

Мобильное приложение
для скачивания

PALTOR DENTAL IMPLANTS
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В РОССИИ